


EMS FOOT MACHINE EASY CORE FOOT

EMS フットマシーン イージーコアフット

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

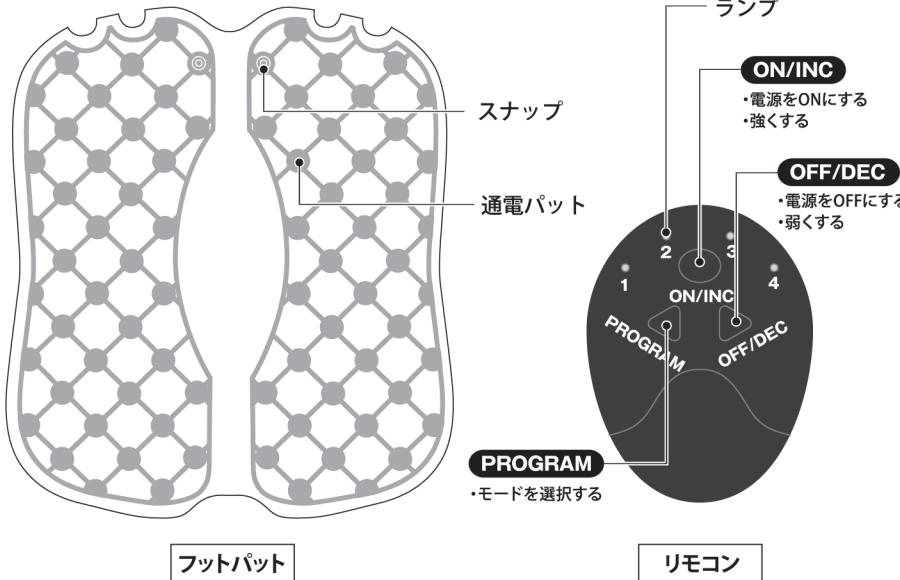


電池の入れ方

本体裏面の電池ボックスのフタを矢印方向にスライドして開けます。
本体イラストと同じ方向に単4電池2本を+、-を正しくセットしてください。

使用電池

単4電池×2本使用(別売)

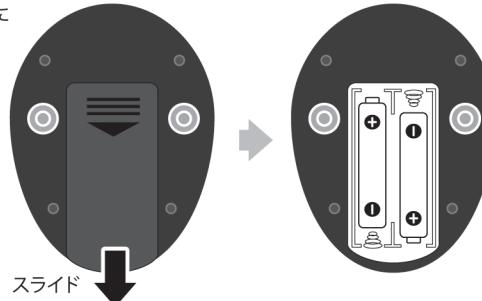

⚠ 電池に関するご注意

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れないでください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しが難い。電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する)
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長時間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の残量が少ないと誤作動(作動時間が極端に短い・12分経っても止まらない・電圧が安定しないなど)や動作しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

⚠ ご使用前に必ずご確認ください

⚠ 下記の方は絶対に使用しないでください。

下記に当てはまる方は、本品を使用中の方の脚部にも触れないでください。
本品を、ベースメーカーなどの体内埋込み型医療電気機器を装着した方の装着部位に近づけないでください。

- ベースメーカーなどの体内埋込み型医療用電子機器を使用されている方。
- 人工心肺などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方。
- 心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方。
- 病中・病後・療養中の方。

⚠ 下記のような医療電気機器とは、絶対に併用しないでください。

- 人工心肺などの生命維持用医療電気機器
- 心電計などの装着型医療電気機器
- 上記に当てはまる方は、本品を使用中の方の脚部にも触れないでください。
- 本品を、ベースメーカーなどの体内埋込み型医療電気機器を装着した方の装着部位に近づけないでください。

⚠ 下記の方は使用しないでください。

- 心臓に障害または弱い方 ●貧血ぎみの方 ●生理中または妊娠されている方
- 皮膚感覚障害または皮膚に異常のある方 ●熱がある場合など、体に異常を感じている方
- 医師に運動を禁じられている方 ●足裏に傷がある方 ●飲酒している方 ●薬を服用中の方
- 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど) ●脚部に知覚障害や異常(感染症、皮ふ炎や傷など)のある方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 脚部の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛)疾患のある方
- 体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方 ●血圧に異常がある方 ●睡眠薬を服用している方
- ステロイド系ホルモン剤の塗布、服用している方 ●タトゥーがある方


※万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。

※足裏以外、皮膚疾患の場所には使用しないでください。

⚠ 下記の方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。

- アレルギー体質の方 ●血行障害のある方 ●悪性腫瘍のある方
- 身体に異常を感じている方 ●その他医療機関で治療中の方

使用方法

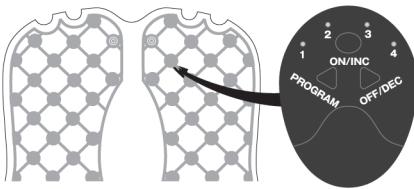

※取り付けの際はスナップ部分の近くを押すようにしてください。破損するおそれがあります。

- ① フットパットのスナップ部分に左図のようにリモコンを取り付けます。
- ② 両足をマットの上に乗せます。
- ※ 裸足でしか動作しません。濡れた足で使用しないでください。

両足が必ず通電パットに密着しているか確認してください

12分間オートトレーニング

1つのモードで12分間経つと自動で電源OFFになります。
※途中でモードを変更すると自動で電源OFFにはなりません。

△ 12分以上、連続使用しないでください。

スイッチの機能

ON/INC

- ・電源をONにする
- ・強くする

PROGRAM

- ・モードを選択する

OFF/DEC

- ・電源をOFFにする
- ・弱くする

お好みモード (操作中はランプが点灯し、動作中は点滅します)

モード	モードA	モードB	モードC	モードD	モードE	モードF
点灯パターン	●○○ 1 2 3 4	○●○○ 1 2 3 4	●○●○ 1 2 3 4	○○●○ 1 2 3 4	○○○● 1 2 3 4	○○●● 1 2 3 4
動作パターン	短い動作と 間隔の 連続的なリズム	やや短い動作と 間隔の 連続的なリズム	非常に長い動作と 間隔の 連続的なリズム	やや長い動作と 間隔の 連続的なリズム	長い動作と 間隔の 連続的なリズム	非常に短い動作と 間隔の 連続的なリズム

- ③ **ON/INC** を押して電源を入れます。
- ④ **PROGRAM** を押してモードを選択します。点灯ランプのパターンでモードを確認してください。
(※動作中でもモード変更が可能です)
- ⑤ **ON/INC** を押すとスタートします。動作中は点灯ランプが点滅します。
- ⑥ **OFF/DEC** を押すと電源 OFF になります。

強度調節方法(レベル10段階調節)

- ⑤の動作中に **ON/INC** を押すごとに強度が上がります。(※はじめはレベル1からスタートします)
- ⑤の動作中に **OFF/DEC** を押すごとに強度を上げた分だけ下がり、電源 OFF になります。
※電源を OFF にすることは強度を上げた分、下がないと電源は切れません。

自動パワーオフ機能

- ・モード選択中などに一定時間操作がされないと、自動で電源が OFF になります。
- ・動作中にフットパットから足を離すと、モードが停止します。
再開する場合は、フットパットに足を乗せてから **ON/INC** を押してください。

⚠ 使用上の注意

- 必ず乾いた裸足の状態でご使用ください。
※靴下などを履いていると通電しません。また濡れた足では使用しないでください。
- 裸足全体が通電パットに触れるように密着した状態でご使用ください。すき間が空いていると、刺激を弱く感じたり、強く感じる場合があります。
- 1日の使用目安は2~3回(1セット12分)までとし、連続して使用しないでください。
※電流の影響には個人差があるので、ご使用の際は注意してください。
- 肌が乾燥していたり、汚れや皮脂が残ったまま使用すると、通電しない場合があります。
- 立って使用する場合は強度を弱めにして壁などを支えに使い、安定した体勢でご使用ください。
- 足を乗せるまでは電源を入れないでください。
- 高温になる場所・湿気の多い場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に極端に重いものや尖ったものを乗せないでください。
- リモコン部分やスナップ部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 浴室などの水場・火気のそばでは使用しないでください。
- 濡れた手で扱わないでください。
- 他の機器と同時使用しないでください。
- ご使用後は、電源を切ってフットパットに電流が残っていないかを確認してからお手入れをしてください。
- フットパットは水拭きができます。
- お手入れの際は、硬くしつこったシンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- フットパットを収納する際は通電パット部分を折り曲げないでください。
- 分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因となります。
- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 一度に強度やスピードを上げ過ぎないでください。加減しながら調節してください。
- 睡眠時や運動中は使用しないでください。
- 本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。
- 人以外に使用しないでください。
- 子どもの手の届く場所に保管しないでください。

保証書

保証書	EMS フットマシーン イージーコアフット
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

【保証内容】

- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であってもお客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

【製品仕様】

材質	EVA、PU、ABS、ニッケル
使用電池	単4電池2本(別売)
本体サイズ	約 W28×D2.5×H33cm(組み立て時)
対応足サイズ	28cmまで
本体重量	約 100g

発売元: 株式会社アクセル

〒541-0058
大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【問い合わせ時間】
月～金 AM10:00～PM5:00