

## ⚠ 必ずご確認ください

- 本製品を顔や目元、デコルテ以外に使用しないでください。
- まぶたや目のくぼみ周辺など、眼瞼の近くには使用しないでください。
- のど(のど仮周辺)には使用しないでください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

- 心臓に障害がある方または弱い方●病中・病後・療養中の方●貧血気味の方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●血行障害、毛細血管拡張、血压に異常のある方●悪性腫瘍のある方●脳神経に異常がある方(てんかんなど)●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38°C以上)している方、または体に異常を感じている方●安静を必要とする方、四肢が不自由な方●乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方●医師からマッサージを禁じられている方●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方●湿疹、乾燥、腫瘍、傷、感染症のある方●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)●ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術を受けた方●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方●レーザー治療、美容整形等の施術をされた方●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方●ステロイド系の薬を服用している方●歯の治療中、治療直後の方●金属アレルギーのある方●目の手術を行った方●目の病気がある方

## ⚠ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損・取り付け状態・電池ボックスが完全に閉まっているかを確認してからご使用ください。  
異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにアタッチメントのぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いしないでください。
- 故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 接続部分を必要以上に強く引っ張るなど、強い衝撃を与えないでください。
- 濡れた手で電池ボックスを触らないでください。
- 1回の使用時間は約2分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。
- 肌の弱い方は、同じ部位に3回以上使用しないでください。
- ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様、乳幼児、ベットには使用しないでください。
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにして、本製品のお手入れをしてください。(詳しくは裏面の『お手入れ方法』をご覧ください)
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 電池の残量が少ないとき電源をONにしても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池に交換してください。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 【製品仕様】

サイズ	約W3×D3×H15cm(ボディ用アタッチメント装着時) 約Φ2.5×H14cm(目元用アタッチメント装着時)	連続使用時間	約2分(1回の使用時間の目安) ※長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。
重量	約50g(総重量)	使用可能期間	約5~6ヵ月(目安)※使用時間により異なります。※新品電池使用の場合。
主材質	ABS、アルミニウム	電 源	単3電池×1本使用(別売)

### 保証書

商品名	フェイシャルトリートメント ミューズ ユー
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

### 【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

### 取扱説明書


# MuseU.

フェイシャルトリートメント ミューズ ユー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

### 各部名称

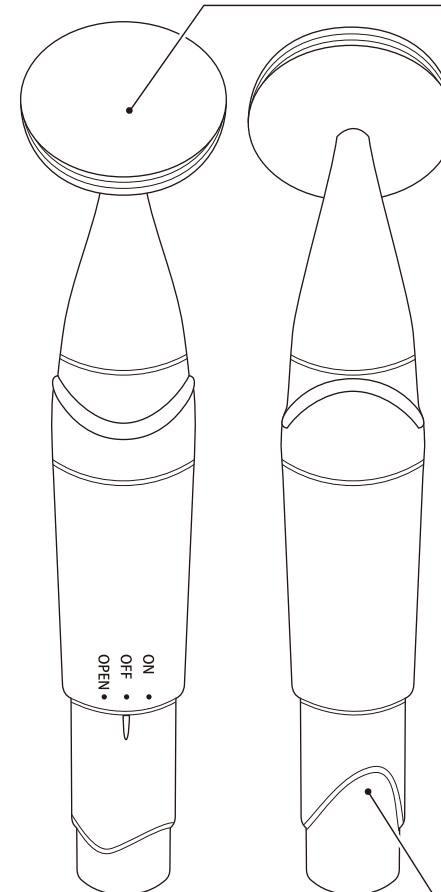


ボディ用アタッチメント

顔やフェイスライン、デコルテなどに使用します。

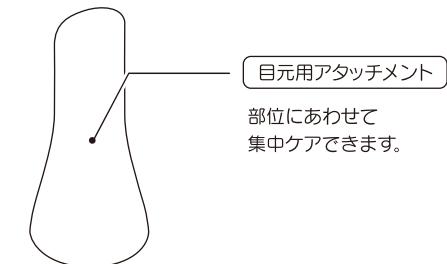

目元用アタッチメント

部位にあわせて集中ケアできます。

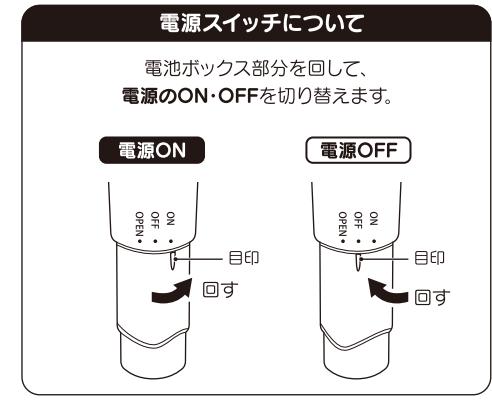

電源スイッチについて

電池ボックス部分を回して、電源のON・OFFを切り替えます。

電源ON

電源OFF

電池ボックス

電池ボックス部分を回すと電池ボックスを開閉できます。

### お問い合わせ先


発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

[お問い合わせ] 月～金(祝日除く)10:00～17:00

## 電池の入れ方

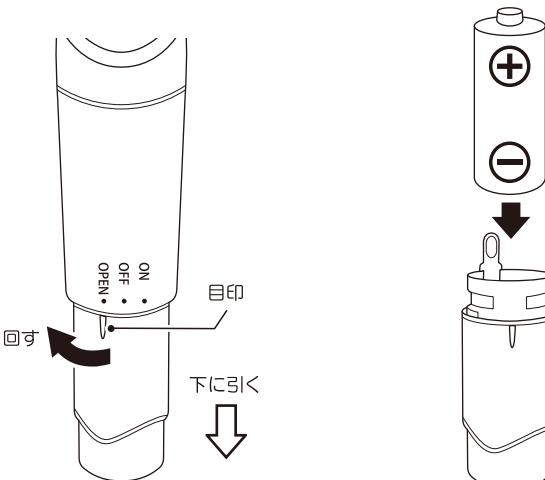

①本体の電池ボックスを矢印方向に回して目印をOPENに合わせ、下に引きます。


②単3電池×1本(別売)の+、-を正しくセットして電池ボックスを開じてください。

※この時、目印がOPENの位置にくるようにしてください。  
※必ず完全に閉まっているか確認してからご使用ください。

## ご使用方法


### 1 用途に合ったアタッチメントを取り付けます。※ボディ用アタッチメントは本体に取り付け済み

※必ず電源がOFFになっていることを確認してください。  
※アタッチメント着脱時に電池ボックス部分を回さないようご注意ください。

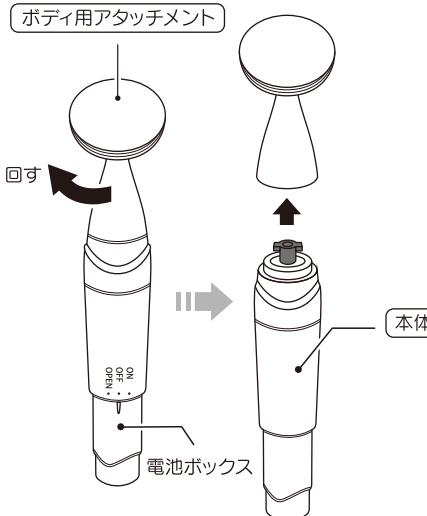

### 取り外し方

本体をしっかりと持ち、アタッチメントをゆっくりと矢印方向に回して外します。

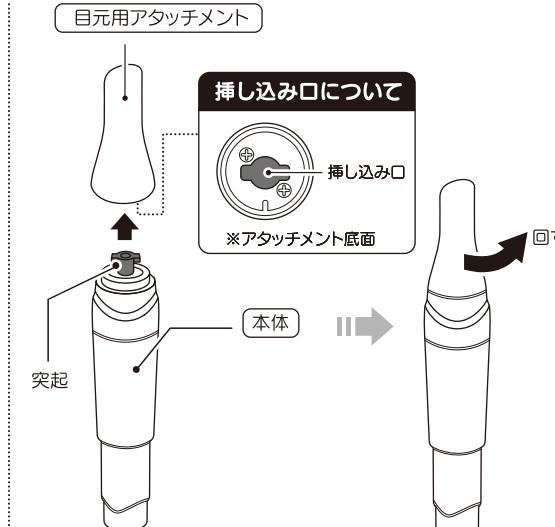

### 取り付け方

アタッチメント底面の挿しこみ口に、本体の突起部分を挿します。本体をしっかりと持ち、アタッチメントをゆっくりと矢印方向に回します。

### 2 本製品の電源スイッチをONにして、肌の表面に当ててください。

※初めて使用する場合は、パッチテストを行ってください。

必ず化粧水や乳液、美容液等を肌につけてください。  
乾いた肌に使用すると皮膚を痛める原因になります。

- ①お手持ちの化粧水や乳液などを顔全体にまんべんなく、つけてください。
- ②肌の表面で、やさしくゆっくり動かします。
- ③ご使用後は、必ず電源をOFFにしてください。

※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、

医師にご相談ください。

※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。


#### 顔・デコルテなどに

#### ボディ用アタッチメントを使用



#### 目元に

#### 目元用アタッチメントを使用

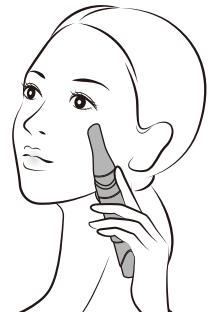

シートマスクの上からでも  
ご使用いただけます。

⚠ 注意 のど(のど仏周辺)には使用  
しないでください。

⚠ 注意 まぶたや目のくぼみ周辺など、眼球の近く  
には使用しないでください。

### ⚠ 注意

- ・本製品を顔や目元、デコルテ以外に使用しないでください。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類、コンタクトレンズは外してください。
- ・1回の使用時間は約2分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。
- ・肌の弱い方は同じ部位に3回以上使用しないでください。
- ・ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。
- ・本製品は防水・防滴仕様ではありません。浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。

## お手入れ方法

※必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。電池ボックス部分を回さないようご注意ください。  
※ご使用のたびに必ずお手入れをしてください。化粧水や乳液等が付着したまま保管しないでください。

①乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。

②汚れがひどい場合は、水を含ませて固く絞った布で軽く拭き取ったあと、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

### ⚠ 注意

- ・本体は防水・防滴仕様ではありません。絶対に丸洗いしないでください。
- ・漂白剤などを使用してのつけ置き洗いはおやめください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスponジなどは使用しないでください。