

WATER PEELING MACHINE

ウォーターピーリングマシン

Fululun
フルルン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

▲ 必ずご確認ください

- 本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- 口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳のまわりには使用しないでください。
- 使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。


- ペースメーカーや人工心臓、心電計などの医用電子機器を使用している方(医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります)
- 心臓に障害がある方または弱い方
- 病中・病後・療養中の方
- 貧血気味の方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 脳神経に異常がある方(てんかんなど)
- 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方
- 発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方
- 安静を必要とする方、四肢が不自由な方
- 乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方
- 医師からマッサージを禁じられている方
- 皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方
- 湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方
- 生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)
- ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術をされた方
- かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方
- レーザー治療、美容整形等の施術をされた方
- 代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方
- ステロイド系の薬を服用している方
- 歯の治療中、治療直後の方
- 金属アレルギーのある方
- 目の手術を行った方
- 目の病気がある方

▲ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。
- 小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがなければご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだケーブルを使用しないでください。
- 本製品を使用中または充電中に、異音・異臭や煙が発生した場合は、ただちに使用・充電を中止してください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品はヘッド部分にのみ防水加工を施しています。
本体を水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 身につけているアクセサリーや貴金属類、コンタクトレンズは外してください。
- 洗顔時には使用しないでください。
- ご使用のたびに本体やシリコンブラシ、USBケーブルに異常がないか点検を行い、汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 初めて使用する前に必ずパッチテストを行ってください。(詳しくはP.3の「パッチテスト」をご覧ください。)
- 本製品を使用する前に、必ず水や化粧水などを肌につまみつけてください。乾いた肌を使用すると皮膚を傷める原因となります。
- 肌の表面に水や化粧水がなくなった場合は、途中で補充してください。
- ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 1回の連続使用時間は約10分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因となります。
- ご使用の際は本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。
- 肌の弱い方は、同じ箇所3回以上使用しないでください。
- 力を入れて肌にヘッドをこすりつけないでください。肌を傷める原因となります。
- 肌の表面にピリピリした痛みを感じた場合は、部位をずらして使用してください。または、水や化粧水などを補充してください。
- ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。また、膨らんだホクロやウイルス性のイボがある部分も避けてください。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。(詳しくはP.8の「お手入れ方法」をご覧ください。)
- 本製品のヘッド部分以外は防水仕様ではありません。丸洗いはしないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。

- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 接続部分を必要以上に強く引っ張るなど、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品やUSBケーブルの上に物を置かないでください。
- 内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。
- 本製品の作動中(電源ONのとき)にキャップを取り付けたり、充電を開始しないでください。
- 充電中は絶対に本製品の電源をONにしないでください。
- 内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。
- 本製品の充電は交換できません。
- 同じ場所に長時間接しているとき色移りする可能性があります。
- 小さなお子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称

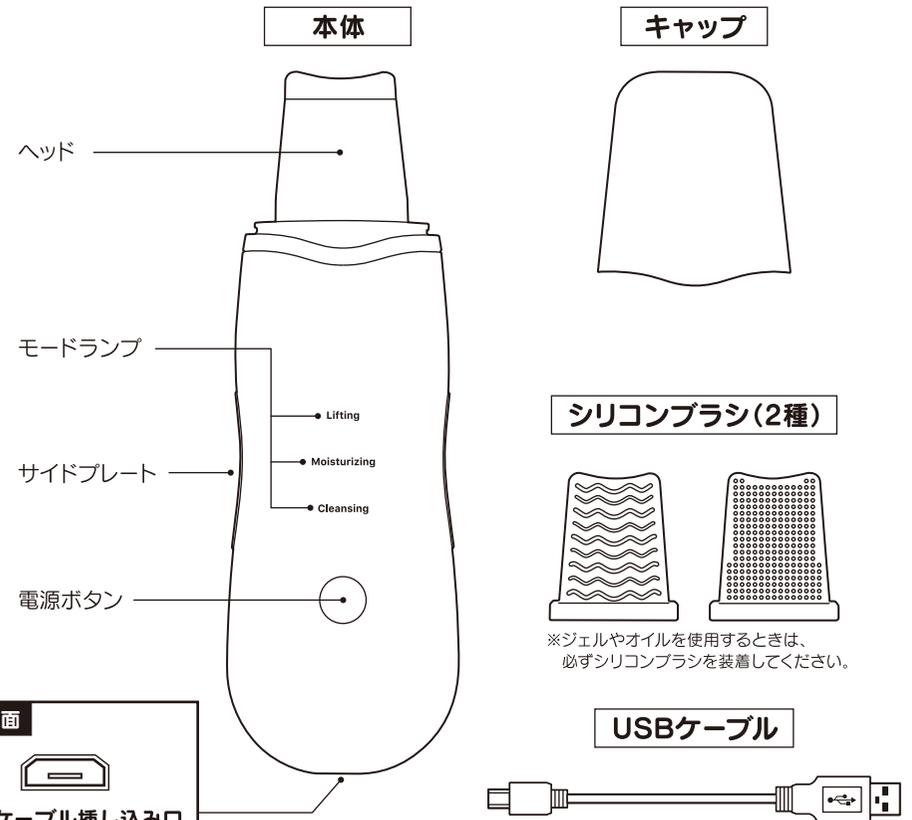

※効果の感じ方には個人差があります。あらかじめご了承ください。
※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

【製品仕様】

サイズ	約W5.5×D1.5×H17.5cm(本体) 約W3.5×D0.7×H3.5cm(シリコンブラシ)	連続使用時間	約10分(1回の使用時間の目安) ※長時間の連続使用は肌を痛める原因となります。
重量	約85g(総重量)	使用頻度	週に1~2回程度(目安)
主材質	ABS、ステンレス、シリコン、PVC	使用電源	USB充電 DC5V/1A
充電時間	約3時間 ※使用環境により異なります。	バッテリー	リチウムイオンポリマー電池

操作方法

- ①キャップを取り外し、本体の電源ボタンを長押し(約2秒)すると電源がONになります。
※必ずキャップを取り外してから電源をONにしてください。

- ②電源ボタンを押すごとに、下記のようにモードが切り替わり、モードランプが点灯します。



各モード詳細		
リフティングモード	モイシュアライジングモード	クレンジングモード
Lifting	Lifting	Lifting
Moisturizing	Moisturizing	Moisturizing
Cleansing	Cleansing	Cleansing
やさしくタッピングして肌を心地よく刺激。リフレッシュしながらお顔を上向き印象へ。	超音波振動の力で、美容液やマスクなどの美容成分の浸透を角質層まで届けるアシストをします。	超音波振動でミスト化した水が洗顔では落としきれない皮脂・毛穴の汚れ・古い角質にアプローチ。

※ご使用方法はP.5~7をご覧ください。

- ③電源ボタンを長押し(約2秒)すると電源がOFFになります。

自動電源OFF機能

本製品は自動電源OFF機能を搭載しています。

各モードの動作開始時から約15分で電源がOFFになります。

(使用中にモードを切り替えても、動作開始時から約15分で電源がOFFになります。)

パッチテスト

※本製品を初めて使用する場合は、皮膚トラブルが起きないか必ずパッチテストを行ってください。

※初めて使用する化粧水や美容液の場合も、同様にパッチテストを行ってください。

- 腕の内側を石鹸などで洗い、タオルなどで水分を拭き取って清潔な状態にします。
- 腕の内側を水または化粧水でたっぷり濡らし、クレンジングモード(詳しくはP.6をご覧ください)を約15分間使用します。
- 48時間経過後、肌に異常(赤みやほてりなど)がなければ本製品をご使用いただけます。




注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に行ってください。
- ・パッチテスト中に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合はただちにパッチテストを中止して洗い流してください。
- ・肌に異常が発生した場合は、本製品を使用しないでください。

充電方法


- ①本体の電源をOFFにし、下図のように付属のUSBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。充電中はモードランプが点滅し、充電が完了するとモードランプが点灯に切り替わります。

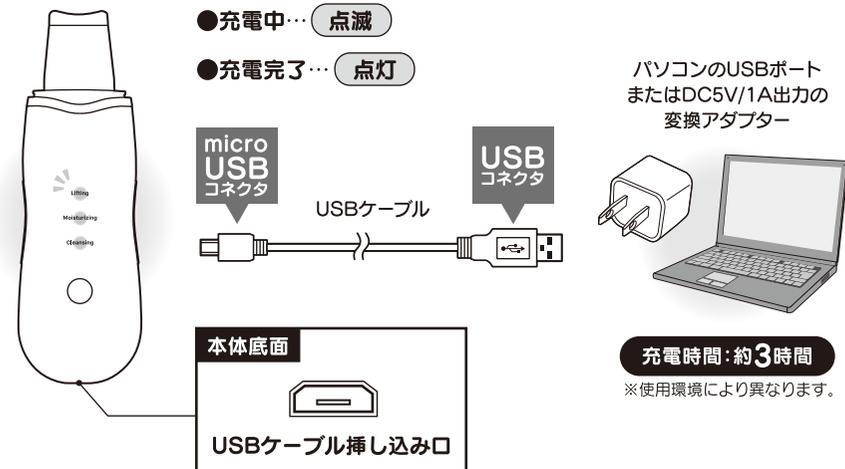

●充電中…点滅

●充電完了…点灯

パソコンのUSBポート
またはDC5V/1A出力の
変換アダプター

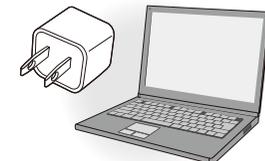

充電時間: 約3時間

※使用環境により異なります。

※本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを
使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。

※USBケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持って
行ってください。

※USBコネクタは、濡れた手で抜き差ししないでください。

※USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにして
ください。故障や感電の原因となります。

※充電中は絶対に本製品の電源をONにしないでください。

※充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。
※パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しない
でください。

※本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を
起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

本体を充電する際

本製品を充電する際は必ず、パソコンの
USBか、本製品の規格に合った
変換アダプターを使用してください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。

DC5V/1Aの変換アダプターを使用してください

- ②モードランプが点灯に切り替わったら充電完了です。

USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や内蔵電池の寿命を縮める原因となります。

※充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

※初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、
十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。
充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

※充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

ご使用方法

- ・本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- ・口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳のまわりには使用しないでください。
- ・使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。
- ・本製品はヘッド部分にのみ防水加工を施しています。本体を水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。また、浴室などの水場や高温・多湿な場所では使用しないでください。
- ・USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類、コンタクトレンズは外してください。
- ・洗顔時には使用しないでください。
- ・本製品を使用する前に、必ず水や化粧水などを肌につけてください。乾いた肌を使用すると皮膚を傷める原因となります。
- ・肌の表面に水や化粧水がなくなった場合は、途中で補充してください
- ・ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・ご使用の際は本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。
- ・肌の弱い方は、同じ箇所3回以上使用しないでください。
- ・力を入れて肌にヘッドをこすりつけないでください。肌を傷める原因となります。
- ・肌の表面にピリピリした痛みを感じた場合は、部位をずらして使用してください。または、水や化粧水などを補充してください。
- ・ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。
- ・また、膨らんだホクロやウイルス性のイボがある部分も避けてください。

注意

ご使用の目安

- 使用頻度は、週に1~2回程度を目安としてください。
- 1回の使用時間は約10分です。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。


肌への当て方とポイント

- 顔全体に水や化粧水などをたっぷりつけた状態でヘッドを肌をやさしく当て、あごから上に向かって肌をなぞるようにゆっくりと使用すると効果的です。
- 温かい蒸したタオルで顔を温めた後や、入浴後に使用すると効果的です。
- ヘッドにシリコンブラシを装着し、ジェルやオイルをつけた上からケアすることもできます。
- ※ジェルやオイルを使用するときは、必ずシリコンブラシを装着してください。

ヘッドの動かし方


使用禁止部位

フェイスラインのケア

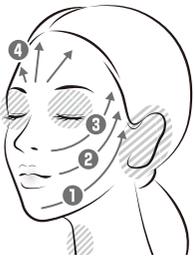

- 顔の中心から外側に向かってヘッドをすべさせます。
- ①あごから耳の手前まで
 - ②口元からこめかみまで
 - ③鼻側面からこめかみまで
 - ④眉の上から髪の生え際まで

鼻周りのケア

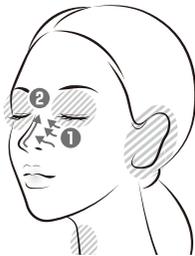

- ①鼻の横から中央まで、鼻の形に沿うように動かします。
- ②鼻の先端から上に向かってすべさせます。
- ③①と②を1セットとし、左右交互に2~3分間行います。

口周り・頬のケア



- 矢印の向きに沿ってヘッドをすべさせます。
- ①あご: 下あごから口元へ
 - ②口周り: あごから鼻の横へ
 - ③頬: 口元から頬骨まで

① クレンジングモード

- 1 クレンジング・洗顔を行い、肌を清潔な状態にします。



※油分や汚れを落としてから本製品をご使用ください。

- 2 顔全体を水または精製水でたっぷり濡らします。



※肌が乾いた状態で使用しないでください。皮膚を傷める原因となります。

- 3 本体の電源をONにし、Cleansing(クレンジングモード)に切り替えてください。下図のように約30~45度の角度で肌の表面にヘッドをやさしく当て、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

- ご使用の際は本体のサイドプレートに手が触れた状態でお使いください。
- P.5の「ヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。
- ヘッドに汚れがついた場合は、その都度、清潔なティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- ご使用後は、必ず本体の電源をOFFにし、お手入れをしてください。(詳しくはP.8の「お手入れ方法」をご覧ください。)
- 顔に残った水などは拭き取り、化粧水や美容液などで肌を整えてください。

ヘッドの表と裏に注意して肌当ててください



使用禁止部位

注意

- 本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- 口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳のまわりには使用しないでください。

※本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。

※肌の表面に水がなくなった場合は、途中で補充してください。乾いた肌を使用すると皮膚を傷める原因となります。

※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。


② モイストチャライジングモード

- クレンジング・洗顔を行い、肌を清潔な状態にします。
- 顔全体を化粧水や美容液でたっぷり濡らします。
- 本体の電源をONにし、Moisturizing(モイストチャライジングモード)に切り替えてください。下図のように約20~30度の角度で肌の表面にヘッドをやさしく当て、ゆっくりと矢印の方向に動かします。
 - ご使用の際は本体のサイドプレートに手が触れた状態でお使いください。
 - P.5の「ヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。
 - ヘッドに汚れがついた場合は、その都度、清潔なティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
 - ご使用後は、必ず本体の電源をOFFにし、お手入れをしてください。(詳しくはP.8の「お手入れ方法」をご覧ください。)
 - 顔に残った化粧水や美容液はしっかりなじませ、乳液やクリームなどで整えてください。



③ リフティングモード

- クレンジング・洗顔を行い、肌を清潔な状態にします。
- 顔全体を水または精製水でたっぷり濡らします。
- 本体の電源をONにし、Lifting(リフティングモード)に切り替えてください。下図のように約20~30度の角度で肌の表面にヘッドをやさしく当て、ゆっくりと矢印の方向に動かします。
 - ご使用の際は本体のサイドプレートに手が触れた状態でお使いください。
 - P.5の「ヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。
 - ヘッドに汚れがついた場合は、その都度、清潔なティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
 - ご使用後は、必ず本体の電源をOFFにし、お手入れをしてください。(詳しくはP.8の「お手入れ方法」をご覧ください。)
 - 顔に残った水などは拭き取り、化粧水や美容液などで肌を整えてください。

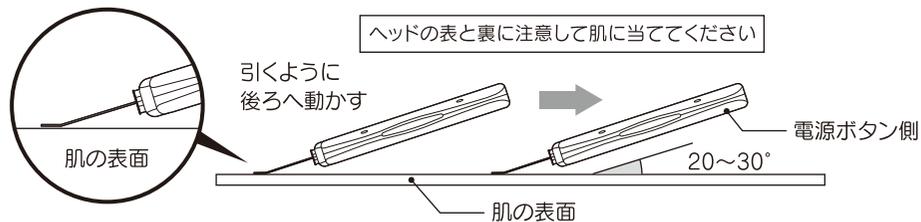

- 注意**
- 本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
 - 口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳の周りには使用しないでください。

※本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。

※肌の表面に水や化粧水などがなくなった場合は、途中で補充してください。乾いた肌に使用すると皮膚を傷める原因になります。

※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。

お手入れ・保管方法

- ※ご使用のたびに必ずお手入れをしてください。化粧水や乳液、汚れなどが付着したまま保管しないでください。
- ※必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※充電中にお手入れしないでください。
- ※お手入れ後はヘッドにキャップを取り付けてから保管してください。
- ※お客様の手の届かないところで保管してください。
- ※火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。

本体

- 乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は、水を含ませて固く絞った布で軽く拭き取ったあと、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

シリコンブラシ

- 流水で汚れを落とした後、十分に乾燥させてください。

注意

- ・本製品はヘッド部分にのみ防水加工を施しています。絶対に水をかけたり丸洗いしないでください。
- ・漂白剤などを使用するのつけ置き洗いはおやめください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

トラブルシューティング

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源ボタンを長押し(約2秒)して電源をONにしてください。 ●充電は十分にされていますか。
数分しか使用できない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電は十分にされていますか。 ●充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。
充電が開始されない	<ul style="list-style-type: none"> ●USBコネクタを充電口にしっかりと挿し込んでください。 ●パソコンや、本製品の規格内のUSB変換ACアダプターを使用していますか。
超音波が痛い	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドの先端ではなく、面が肌に触れるようにしてください。 ●水や化粧水をたっぷりつけ、肌の上を軽くすべらせてください。
超音波が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドが肌に密着していますか。面が肌に触れるようにしてください。 ●充電は十分にされていますか。充電をしてください。

※効果の感じ方には個人差があります。あらかじめご了承ください。

保証書

商品名	ウォーターピーリングマシン フルルン		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに关しましては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時シート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、シート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~17:00