

BODY CARE ROD

ボディケアロッド
Chushushou

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

！必ずご確認ください

- 本製品は一般家庭用です。治療を目的としたものではありません。
- 使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に身体に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

- ベースメーカーや人工心肺、心電計などの医用電子機器を使用している方(医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります)●心臓に障害がある方または弱い方●病中・病後・療養中の方●貧血気味の方●自ら意思表示ができない方や操作を行えない方●血行障害、毛細血管拡張、血压に異常のある方●悪性腫瘍のある方●脳神経に異常がある方(てんかんなど)
- 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方●安静を必要とする方、四肢が不自由な方●乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方●医師からマッサージを禁じられている方●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け、炎症のある方、肌に関する施術を受けている方●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方●ステロイド系の薬を服用している方●高血圧の方、紫斑になりやすい方●めまい、ふらつきなど平衡感覚に異常がある方、平衡感覚に影響が出る薬を服用している方●骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れ、痛風、などの急性(疼痛性)疾患の方●腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊椎狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科的疾患の方●背骨に異常のある方

※下記の部位には使用しないでください。

- 整形手術をした部位●皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位●皮膚トラブルのある部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位●骨折部位●頭部●首●胸部や腹部●背骨などの骨部●陰部●ひじ・ひざなどの関節部

《製品仕様》

サ イ ズ	約Φ4×H20.5cm	使 用 電 源	USB充電 DC3.7V/1.2A
重 量	約145g(本体)	充 電 時 間	約1時間 ※1
主 材 質	シリコン・ABS・PVC	連続使用時間	約15分(1回の使用時間の目安) ※2

※1 充電時間は環境や使用頻度などによって異なります。※2 長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。

※効果の感じ方には個人差があります。あらかじめご了承ください。

※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

保証書

商品名	ボディケアロッド シュシュ
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入から6ヶ月
ご購入店舗	

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内であっても、お客様による過失が原因の破損、故障はご対応致しかねます。

お問い合わせ先


発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

各部名称

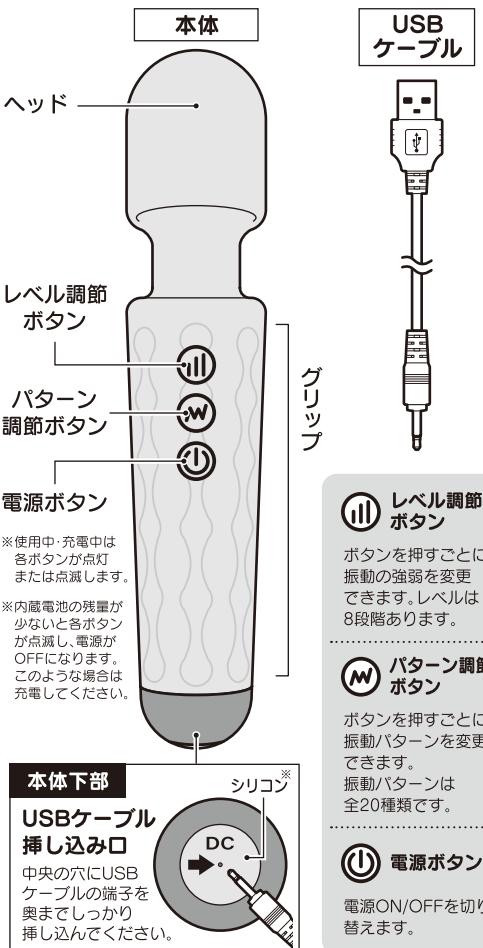

※シリコン部分は外さずにそのまま挿し込んでください。

△ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用の前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●ご使用のたびに本体やUSBケーブルに異常がないか点検を行い、汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れないほど異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品を使用中または充電中に、異音・異臭や煙が発生した場合は、ただちに使用・充電を中止してください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本体やUSBケーブルの上の物を置かないでください。●不慣れな方だけで使用せたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。●浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばでは使用しないでください。●本製品は完全防水ではありません。故意に水中に沈めたり、水中で使用しないでください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に水などの液体を入れないでください。故障や感電の原因となります。●ベルトやアクセサリー類は外してからご使用ください。●1回の使用時間は約15分をを目安としてください。長時間の連続使用はおやめください。●肌の弱い方は、同じ部位に3回以上使用しないでください。●力を入れて本体を無理に押しつけるなど、体に過度の負担をかける使用はおやめください。肌を傷めたり、事故や体調不良の原因になります。●首周辺に使用するときは、特に注意し、首の前方には使用しないでください。●ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。●ご使用後は必ず本体の電源をOFFにし、お手入れを行ってください。(詳しく述べる場合は「お手入れ方法」をご覧ください)。●内蔵電池の残量が少ないと、電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。●本体の作動中(電源ONのとき)に充電を開始しないでください。また、充電中は絶対に本体の電源をONにしないでください。●内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●本製品の内蔵電池は交換できません。●同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。●お子様の手の届かない所に保管してください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

充電方法


※初めてご使用する場合は充電を行ってください。

△ 充電前にご確認ください

- 充電時間は環境や使用頻度などによって異なります。●USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだケーブルを使用しないでください。●USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。●USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に水などの液体を入れないでください。故障や感電の原因となります。●充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。●パソコンで充電する場合、パソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。●初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、内蔵電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。

- ①本体の電源をOFFにし、付属のUSBケーブルで本体とパソコンなどを接続します。

パソコンのUSBポート
またはDC5V/1A出力の
変換アダプター

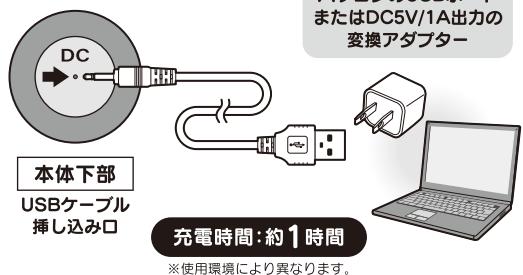

充電時間:約1時間
※使用環境により異なります。

※本製品の規格以上の変換アダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。

②充電が開始されると、各ボタンが点滅します。

※充電中は絶対に本製品の電源をONにしないでください。

③充電が完了すると各ボタンが点灯に切り替わります。
USBケーブルを抜いて充電を終了してください。

※充電完了後、USBケーブルを接続したままでする、過充電による故障や内蔵電池の寿命を縮める原因となります。

本製品を使用する前に必ずご確認ください

●はじめは短い時間で使用してください。

強い刺激に慣れていないと、けがや体調不良の原因になります。
振動の影響には個人差があるので、ご使用の際は注意してください。

●1回の使用時間は15分以内を目標にし、同一箇所への連続使用は3分以内を目標にしてください。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にしてください。最低30分間以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。本体が熱くなっていると、故障の原因になります。

●本体は必ず手を持って使用してください。上に乗ったり、座ったりして荷重をかけないでください。

転倒による事故やけが、故障の原因になります。

●頭部、首、胸部や腹部、背骨などの骨部、陰部、ひじ・ひざなどの関節部には絶対に使用しないでください。

上記の部位には対応しておりません。事故やけが、体調不良の原因になります。

●本製品は振動します。落とさないようにしっかりと握ってください。

不意に落とした時に、足などに当たったり床面を傷つける恐れがあります。

●強く押しつけて使用しないでください。

皮膚や筋肉を傷める原因になります。また肌の弱い方は素肌で使用しないでください。

●本製品を使用するときは、ベルトやアクセサリー類を外してください。

皮膚や筋肉を傷める原因になります。

●次のようなときは使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。

1. 疲労が激しい時
2. 飲酒前・飲酒後
3. 食前・食後の1時間
4. 睡眠中
5. 皮膚に異常のある時

●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

●子供やペットに本製品で遊ばせたり、使用させないでください。

事故やけが、体調不良の原因になります。

●使用時または充電中に異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。

破損・発火の原因になります。

お手入れ方法

●ご使用後は本体の電源をOFFにしてからお手入れを行ってください。●本製品は完全防水ではありません。丸洗いはしないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。●USBケーブル挿し込み口付近を避けて水で洗い流してください。汚れが気になる場合は中性洗剤などで洗浄後、充分に洗い流してください。●USBケーブル挿し込み口付近の汚れは、水に浸し硬く絞った布などで拭き取ってください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に水などの液体を入れないでください。故障や感電の原因となります。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。故障やひび割れ、変色などの原因になります。

保管方法


●本体の電源をOFFにし、お手入れを行ってから保管してください。また、USBケーブルをパソコンなどから抜いて保管してください。●長期間使用しない場合は、本体を満充電にしてから保管してください。また、1ヵ月ごとに本体を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないまま放置すると充電ができない場合があります。●色移りしやすい濃色系の収納袋等に入れて保管しないでください。本製品に色移りする恐れがあります。●本製品を火のそばや炎天下、浴室や車内など高温・多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。

ご使用方法

1 電源をONにする

電源ボタンを押すと電源がONになり、振動します。
レベル調節ボタンやパターン調節ボタンを押し、
お好みの振動に変更してください。



※ボタンはしっかりと押してください。
押す力加減によっては反応しない場合があります。

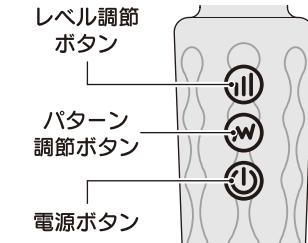


2 グリップをしっかりと握り、ヘッド部分を肌に軽く当てて使用してください。

△ 注意

- 1回の使用時間は15分以内を目標としてください。
また、同一箇所への連続使用は3分以内を目標としてください。

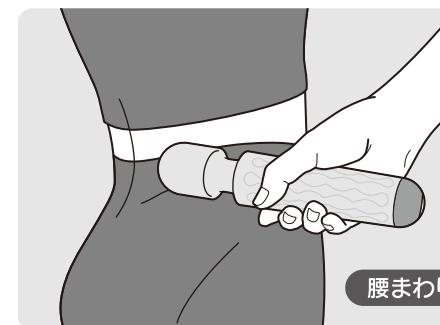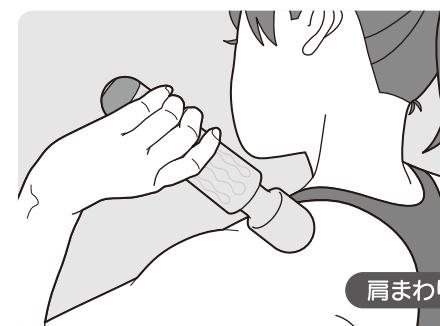

▼各部位にアプローチが可能▼

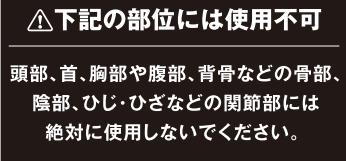

3 電源をOFFにする

使用中に振動を停止するには、電源ボタンを押して電源をOFFにしてください。
※本製品に自動電源OFF機能はございません。手動で電源をOFFにしてください。