

ジェットケアα JET CARE α

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 必ずご確認ください

本製品は一般家庭用です。治療を目的とした使用は絶対にしないでください。

使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。





※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

- 歯周病の疑いがある方・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある方
- 拔歯を行って間もない方
- 口腔内の感覚が弱い方
- 小さなお子様や自分で操作が行えない方
- 心臓に障害がある方または弱い方
- 貧血気味の方
- 血行障害、毛細血管拡張、圧亢に異常のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 脳神経に異常がある方(てんかんなど)
- 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方
- 発熱(38°C以上)している方、または体に異常を感じている方

⚠ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損が無いか、また、本体・ノズル・タンクが正常に取り付けられるかをご確認ください。
異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- タンクに常温の水道水以外のものは入れないでください。故障の原因になります。また40°Cを超える温水を入れないでください。
- 本製品は一人用です。他の人とノズルを共有しないでください。
- 本製品を使用する際は、洗面台などでご使用ください。水が飛び散り、洋服や周囲が濡れるおそれがありますのでご注意ください。
また、濡れて困るようなものは近くに置かないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 不慣れな方だけを使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ベッドの近くで使用しないでください。
- 本体は完全防水ではありません。絶対に丸洗いしないでください。
- 事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 本製品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
同じ場所に長時間接していると色移りする場合があります。
- 長時間のご使用はおやめください。口腔内のトラブルを引き起こすおそれがあります。
- 人やベッド、火に向けて使用しないでください。
- 口腔内以外には使用しないでください。
- 内蔵電池の残量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。
このような場合は充電してください。
- 内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。
液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 内蔵電池は長期間充電されないと性能が著しく落ちる場合がございます。
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。
- 本製品を保管する際は、必ず本体のチューブ・タンク、ノズルなどに水が残っていないか確認してから、保管してください。
- タンク内の水は必ず使いきるか、残った分は捨ててください。水を入れたまま保管しないでください。
- お手入れの際は必ず電源をOFFにしてください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称

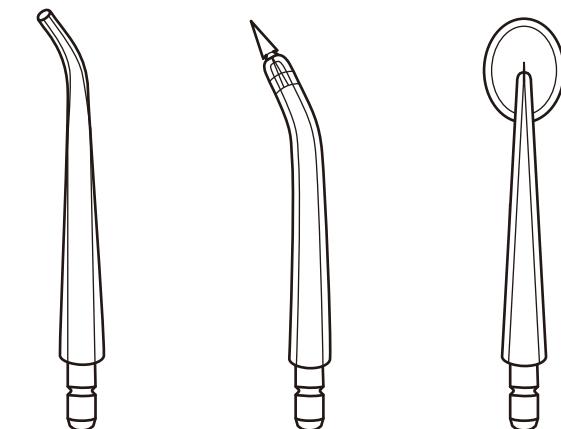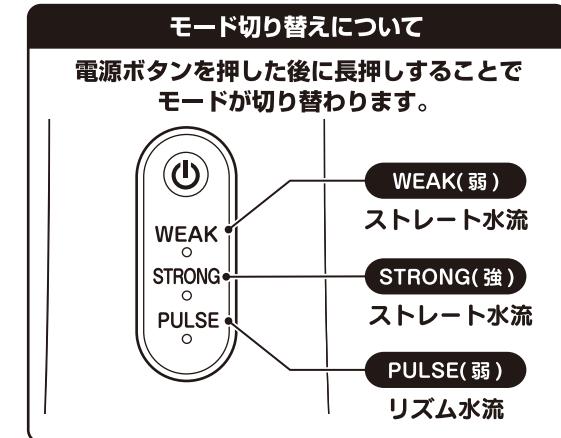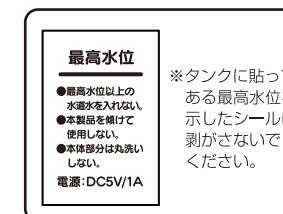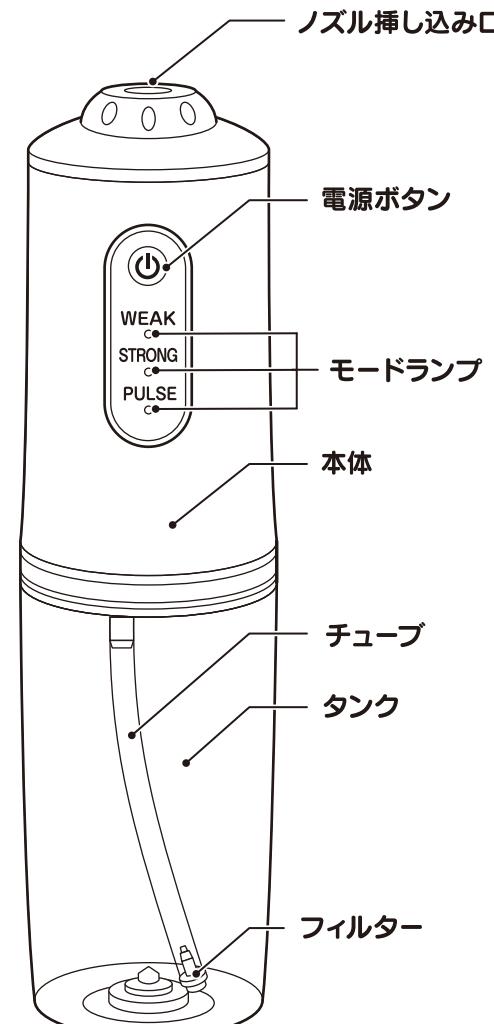

ノーマルノズル


歯の隙間や表面の汚れを洗浄する際に使用します。

ポイントノズル

歯の隙間や磨きにくい場所に使用します。

舌用ノズル


舌の表面をお手入れする際に使用します。

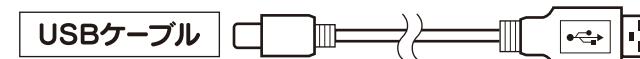

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。

充電方法

本体裏側

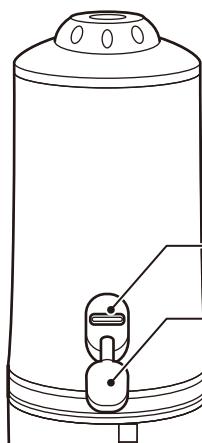

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、本製品の規格に合った変換アダプターを使用してください。
※本製品に変換アダプターは付属しておりません。
別途市販のものをご用意ください。

DC5V/1Aの変換アダプターを使用してください。


USBケーブル
挿し込み口
カバー

Type-C
USB
コネクタ

USBケーブル

USB
コネクタ

パソコンのUSBポート
またはDC5V/1A出力の
変換アダプター

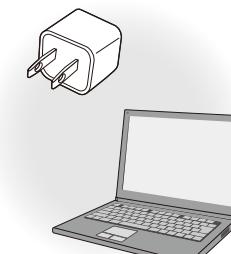

充電時間：約4時間

※使用環境により異なります。

- 充電中…… モードランプが順番に点滅
- 充電完了… モードランプがすべて点灯

①本体の電源をOFFにし、カバーを開けて付属のUSBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。充電中はモードランプが順番に点滅します。

※本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。

※USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持ち行つてください。

※USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。

※USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。

※充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。

※充電が始まらない場合は、USBケーブルを直してください。

※パソコンで充電する場合、パソコンが起動しないでください。

※本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

②全てのモードランプが点灯に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてカバーを閉じてください。

※充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。

※初回の充電は上記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。

その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻ります。

※充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません。)

お手入れ方法

※必ず電源をOFFにし、充電をしていない状態で行ってください。

本体

- ・タンクとノズルを取り外して電源をONにし、水抜きを行ってください。ノズル挿し込み口から水が出なくなったら電源をOFFにし、水気が残らないよう充分に乾燥させてください。
- ・水洗い不可です。汚れが目立つ場合は乾いた布で拭き取ってください。
- ・USBケーブル挿し込み口にホコリが溜まらないよう、ご使用のたびにお手入れしてください。

チューブ・タンク・ノズル

- ・水洗い可能です。汚れやゴミがある場合は取り除き、水気が残らないよう充分に乾燥させてください。チューブやノズル内の汚れが気になる場合は、中性洗剤を少量タンクに入れ水で薄めたあと、通水を行つてください。その後、洗剤が残らないよう水道水で充分に通水やすすぎを行つてください。
- ・チューブのフィルターは柔らかいブラシなどで汚れを取り除いてください。

注意

- ・本体は完全防水ではありませんので、絶対に丸洗いしないでください。
- ・漂白剤などのつけ置き洗いはおやめください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスponジなどは使用しないでください。
- ・チューブ、フィルター、ポイントノズルのシリコンを取り外すことはできません。故障の原因になりますので分解しないでください。


ご使用方法

⚠ ご使用前に必ずご確認ください

歯周病の疑いがある方・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある方は使用不可

- 歯面に付着している歯石は水流だけでは除去できないため、必ずブラッシングが必要です。歯磨き後に、本製品を使用してください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 初めてご使用される際は洗面ボウルなどに向けて噴射し、試運転してください。各モードの強さ、各ノズルの水の噴射具合を確認してください。
- 初めてご使用される、または長期間ご使用されていない場合は【WEAK】モードで行ってください。
- 本製品は水が勢いよく噴射されますので洗面台などの上でご使用ください。その際、ノズルを口に入れて必ず軽く口を閉じた状態で電源を入れてください。
- 洗浄後の水は飲み込まないでください。
- 本製品を傾けすぎないようにしてください。水が出ない場合があります。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。
- 歯ぐきに使用する場合は、【PULSE】モードで行ってください。
- 1回の噴射時間は約2分です。モードによっては先にタンク内の水が無くなります。口腔内が傷つく恐れがありますので長時間のご使用はおやめください。
- 歯周ポケットに噴射したりノズルの先を入れないでください。炎症をおこす恐れがあります。
- 本製品をご使用後は必ず本紙の『お手入れ方法』をよく読み、お手入れを行つてください。
- タンクに水が入っていない状態で電源を入れないでください。破損や故障のおそれがあります。

本体の組み立てかた・給水方法

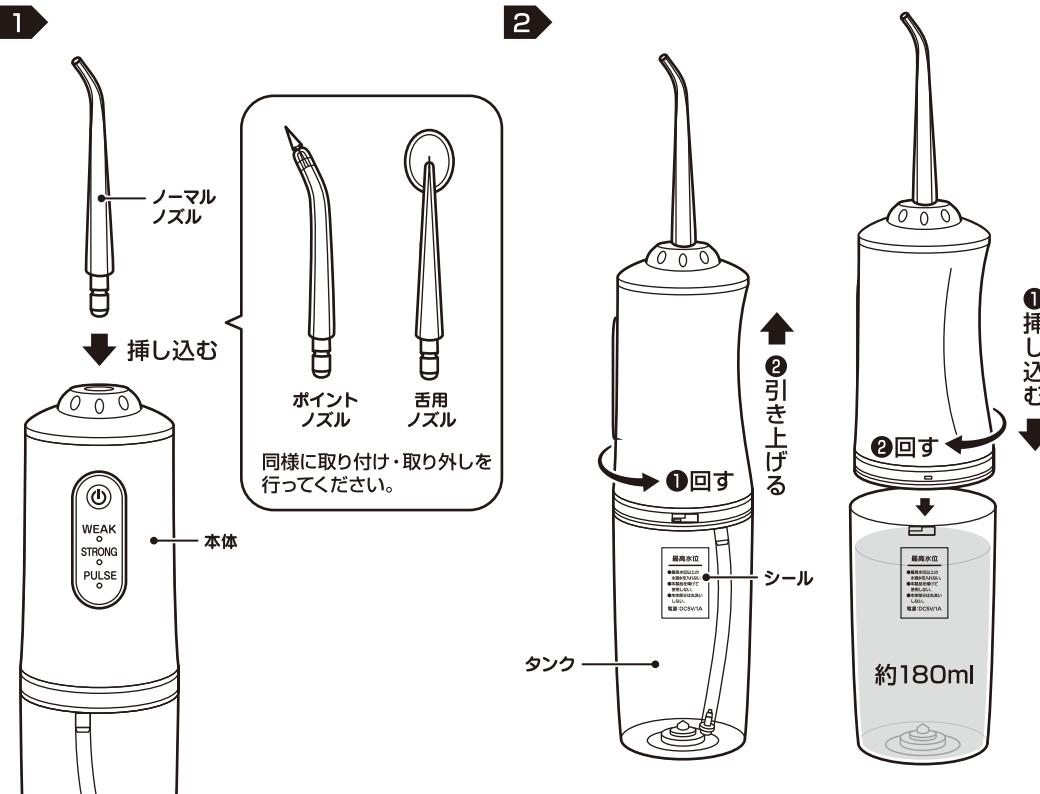

本体の操作・洗浄方法

3 ①洗面台に前かがみになり、洗面ボウルの上に顔がくるように立ちます。

②口の中にノズルを入れ、軽く口を閉じてから電源ボタンを押します。
※洗浄後の水は飲み込まないでください。

操作方法

電源ボタンを押すとONになりノズルから水が噴射されます。
もう一度電源ボタンを押すとOFFになります。
電源ボタンを押した後、さらに長押しをすることでモードが切り替わります。

WEAK → STRONG → PULSE

動作中のモードランプが点灯します。

③歯や歯ぐきに水が当たるようにし、洗浄してください。

ポイント 水流方向は歯や歯ぐきに対して垂直に当てるすると汚れが取れやすくなります。

④洗浄が終わったら、口の中にノズルを入れた状態で電源をOFFにしてください。

⑤口の中からノズルを出し、本製品のお手入れを行ってください。

※本紙「お手入れ方法」参照



●水が出ない、止まる・タンクが外せない場合

シリコンをずらして隙間を作る



タンク底面

●水が出ない、止まる・タンクが外せない等の症状が出た場合はタンク内が真空になっている可能性がある為、下記をお試しください。

タンクとシリコンの間に隙間を開けるようにシリコンをずらしてください。

※鋭利なもので外そうとするとシリコンが傷つきますのでご注意ください。
※水漏れにご注意ください。

●歯ぐきの出血について


健康な歯ぐきでも、これまでになかった刺激を与えたことで使いはじめに出血する場合があります。
1~2週間で出血は止まりますが、2週間以上出血が続く場合は歯ぐきに異常(歯周病など)があることも考えられますので使用を中止し、必ず歯科医に相談してください。

※効果には個人差があります。
あらかじめご了承ください。

ノズルの使用方法


⚠ ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。

ノーマルノズル

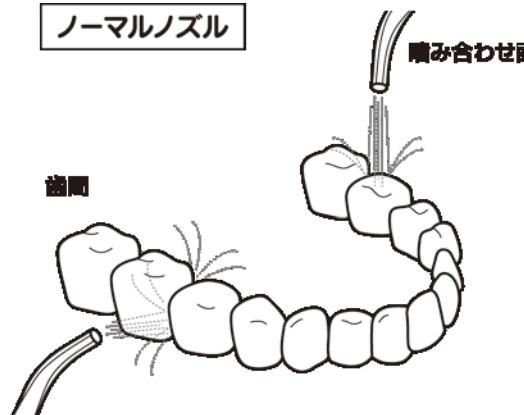

ノズルをゆっくりと歯並びに沿って移動させ、歯間や、噛み合わせ面を洗浄します。

ポイントノズル

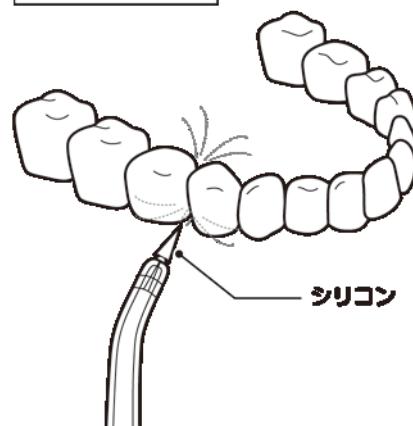


・マルノズルでも取れない汚れがある場合は、
・ントノズルを使用し、先端のシリコン部分を
間に向けて洗浄します。

イントノズルの先端からは水が出ます。



注意 歯周ポケットにシリコン部分を入れて洗浄しないでください。

舌用ノズル

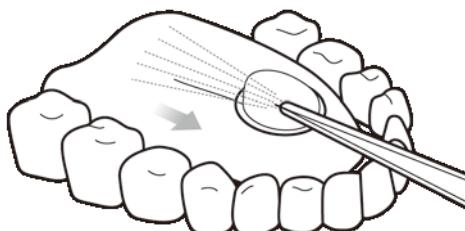

ノズルを舌の上にのせて奥から手間にゆっくり移動させ、洗浄します。

*舌用ノズルの先端からは水が出ます。

保証書

商品名	ジエットケア アルファ		
購入日	年	月	日
保証期間	ご購入から6ヶ月		
ご購入店舗			

【保証内容】

- 本製品をご購入後6ヶ月以上経過したものに関しては保証の対象外といたします。
- 保証期間内に本製品の取扱、注意事項に従った正常な使用状態で破損、故障した場合のみ修理致します。
- 保証書と保証期間を証明するもの(お買い上げ時レシート等)をご用意の上、お問い合わせください。
- 製品、保証書、レシート等がない場合や保証期間内、未使用品であってもお客様による過失が原因の破損、故障、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡できるインターネットや店舗で購入された場合はご対応致しかねます。

製品仕様	サ イ ズ	約Φ6×H21.5cm(本体) 約Φ1×H8.5cm(ノーマル・ポイントノズル) 約W1.5×D2×H8.5cm(舌用ノズル)
	重 量	約220g(本体)、約10g(ノズル3本合計)
	主 材 質	PC、ABS、シリコン
	電 源	USB充電(DC5V/1A)
	充 電 時 間	約4時間
	1回の噴射時間	約2分 ※モードによる
	使 用 可 能 時 間	約30分
	モ ー ド	WEAK(弱・ストレート)、STRONG(強・ストレート)、PULSE(弱・リズム)
	タ ン ク 容 量	約180ml
	耐 熱 温 度	約0~40°C

※充電時間・使用時間等はあくまで目安です。使用環境により異なります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00