

# ジェットケア<sup>アルファ</sup>α ポータブル

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

### ⚠️ 必ずご確認ください

本製品は一般家庭用です。治療を目的とした使用は絶対にしないでください。  
使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。


※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●歯周病の疑いがある方・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある方●抜歯を行って間もない方●口腔内の感覚が弱い方●小さなお子様や自分で操作が行えない方●心臓に障害がある方または弱い方●貧血気味の方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●悪性腫瘍のある方●脳神経に異常がある方(てんかんなど)●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方

### ⚠️ 使用上のご注意

●製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用前に本製品に変形・破損が無いのか、またタンクが正常に取り付けられるかをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用ごとにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●タンクに常温の水道水以外のものは入れないでください。故障の原因になります。また40℃を超える温水を入れしないでください。●本製品は一人用です。他の人と共有しないでください。●本製品を使用する際は洗面台などでご使用ください。水が飛び散り、洋服や周囲が濡れるおそれがありますのでご注意ください。また、濡れて困るようなものは近くに置かないでください。●本製品の上に物を置かないでください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ペットの近くで使用しないでください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。同じ場所に長時間接していると色移りする場合があります。●長時間のご使用はおやめください。口腔内のトラブルを引き起こすおそれがあります。●人やペット、火に向けて使用しないでください。●口腔内以外には使用しないでください。●本製品を保管する際は、タンク内の水を全て捨て、十分に乾燥させてから保管してください。●ご使用のたびにタンク内の水は必ず使いきるか、残った分は捨ててください。水を入れたまま保管しないでください。●シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●火気のそばでは使用しないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●お子様の手の届かない所に保管してください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 各部名称

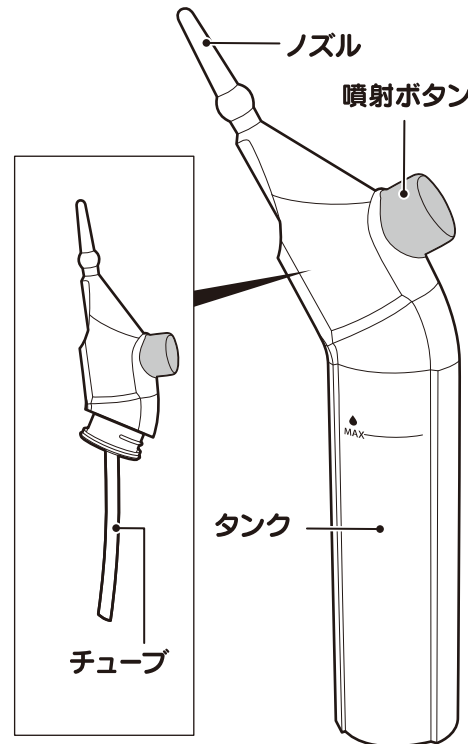

### お手入れ方法

- タンクを取り外しタンク内に残った水を全て捨ててください。  
ノズルから水が出なくなるまで噴射ボタンを押し、水気が残らないよう十分に乾燥させてください。
- ※ノズルから水が出なくなっても本体内部に水が残っている場合があります。

- 汚れやゴミがある場合は取り除き、水気が残らないよう十分に乾燥させてください。  
チューブは柔らかいブラシなどで汚れを取り除いてください。  
チューブ内の汚れが気になる場合は、中性洗剤を少量タンクに入れ水で薄めたあと、通水を行ってください。その後、洗剤が残らないよう水道水で十分に通水やすすぎを行ってください。



注意

- 漂白剤などでのつけ置き洗いはおやめください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

### ご使用方法

#### ⚠️ ご使用前に必ずご確認ください

歯周病の疑いがある方・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある方は使用不可

- 歯面に付着している歯石は水流だけでは除去できないため、必ずブラッシングが必要です。  
歯磨き後に、本製品を使用してください。
- 初めてご使用される際は洗面ボウルなどに向けて噴射し、水の噴射具合を確認してください。
- 本製品は水が勢いよく噴射されますので洗面台などの上でご使用ください。  
その際、ノズルを口に入れて必ず軽く口を閉じた状態行ってください。
- 洗浄後の水は飲み込まないでください。
- 本製品を傾けすぎないようにしてください。水が出ない場合があります。
- ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。
- タンク満水時の噴射可能回数は約70回です。(※弊社調べ)  
口腔内が傷つく恐れがありますので長時間のご使用はおやめください。
- 歯周ポケットに噴射したりノズルの先を直接当てないでください。炎症をおこす恐れがあります。
- 本製品をご使用後は必ず本紙の『お手入れ方法』をよく読み、お手入れを行ってください。
- 持ち運び時にカバンなどに入れる際は防水ケースなどに入れ、濡れても差し支えないものと一緒に入れてください。ノズルから水が出なくなっても本体内部に水が残っている場合があります。


## ご使用方法(つづき)

### 給水方法

- ①本体上部を矢印の方向に回した後、上に引き上げます。水道水をタンク外側のMAX線まで入れます。(約60ml)
- ②本体上部とタンクの凹凸を合わせ逆の手順で確実にタンクを取り付けてください。



- ・常に新しい水道水またはぬるま湯を使用してください。(40℃を超える温水を使用しないでください。)
- ・水道水以外は使用しないでください。
- ・MAXの線以上の水(約60ml)を入れないでください。

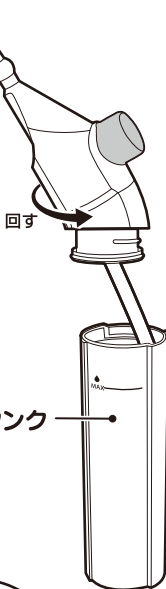

### 洗浄方法

- ①洗面台に前かがみになり、洗面ボウルの上に顔がくるように立ちます。
- ②口の中にノズルを入れ、軽く口を閉じてから噴射ボタンを押します。  
※洗浄後の水は飲み込まないでください。

- ③歯間や舌に水が当たるようにし、洗浄してください。

#### ポイント

水流方向は歯間や舌に対して垂直に当てると汚れが取れやすくなります。

- ④洗浄後、口の中からノズルを出し、本製品のお手入れを行ってください。

※本紙「お手入れ方法」参照



### ●歯ぐきの出血について

健康な歯ぐきでも、これまでになかった刺激を与えたことで使いはじめに出血する場合があります。1～2週間で出血は止まりますが、2週間以上出血が続く場合は歯ぐきに異常(歯周病など)があることも考えられますので使用を中止し、必ず歯科医に相談してください。

※効果には個人差があります。  
あらかじめご了承ください。

## 【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入シートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1



0120-412-917

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	ジェットケア アルファ ポータブル (品番:AXL-676)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

#### 製品仕様

サ イ ズ	約W3.5×D8×H20.5cm
重 量	約55g
主 材 質	ABS・PE・PP
タ ン ク 容 量	約60ml
耐 熱 温 度	約0～40℃