

LUFIORA

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

⚠ 必ずご確認ください


※下記の部位には、本製品を使用しないでください。

●傷口や目、口、局部など粘膜部位 ●はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位 ●過度に日焼けなど肌に異常のある部位 ●当日、脱毛した部位 ●整形手術をした部位 ●背骨など骨が出っぱっている部位 ●金属・プラスチック・シリコンを埋め込んでいる部位 ●指やのど、アキレス腱など細い部位

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●金属アレルギーの方 ●肌の弱い方 ●紫斑になりやすい方 ●心臓に障害がある方または弱い方 ●皮膚知覚障害の方 ●アレルギー体質の方 ●病中・病後・療養中の方 ●貧血気味の方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●脳神経に異常がある方(てんかんなど) ●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方 ●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方 ●安静を必要とする方、四肢が不自由な方 ●乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方 ●医師からマッサージを禁じられている方 ●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方 ●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方 ●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください) ●ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術をされた方 ●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方 ●レーザー治療、美容整形等の施術をされた方 ●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方 ●ステロイド系の薬を服用している方 ●歯の治療中、治療直後の方 ●飲酒している方

各部名称

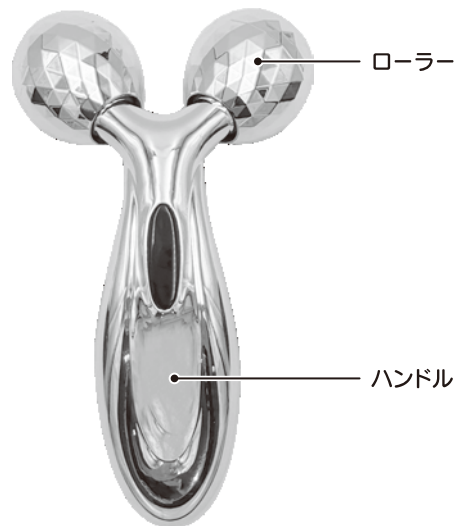

ご使用中に痛みや不調を感じた時、
ご使用後に肌に異常を感じた時は、
ただちに使用を中止してください。

製品仕様	
サイズ	約W9×D4×H16cm
重量	約95g
主材質	ABS(UVメッキ)・PC

※写真はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

ご使用方法

ローラーが肌を持ち上げる強さは、ハンドルの角度で調節が可能です。
同じ箇所の使用時間は約3～5分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。

※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。

ローラーを前に進める場合

ハンドルを徐々に起こして、
肌を持ち上げる強さをご確認ください。



肌に痛みを感じたら
ハンドルを寝かせてください。

ローラーを後ろに引く場合

ハンドルを徐々に寝かせて、
肌を持ち上げる強さをご確認ください。




肌に痛みを感じたら
ハンドルを起こしてください。

基本的なご使用方法 ※下半身やウエストは肌がローラーに挟まれやすい部位です。角度に注意してください。




顔

口角から頬骨の下を通して耳横までローリング。
上に向かってローリングするように意識してください。

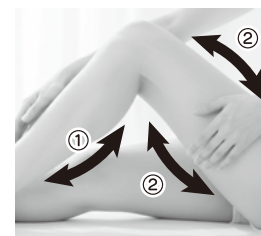


下半身

①足首から膝裏にかけて、ふくらはぎをローリング。
②太ももの内側、後ろ側をローリングしてください。

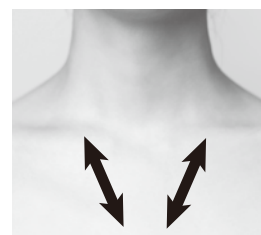

デコルテ

鎖骨下のくぼみにローラーを当てるようにローリングしてください。

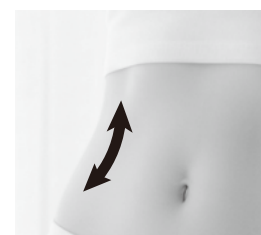

お腹

ウエストラインに沿ってローリングしてください。

お手入れ方法

ご使用のたびに必ずお手入れをしてください。化粧水や乳液などが付着したまま保管しないでください。

- ①乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。
- ②汚れがひどい場合は、水を含ませて硬く絞った布で汚れ拭き取ります。

注意

- ・内部に水が入る場合がありますので、絶対に丸洗いしないでください。
- ・漂白剤などを使用してのつけ置き洗いはおやめください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損がないかを確認してからご使用ください。
異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用ごとにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 可動部分を必要以上に強く引っ張る、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- 同じ箇所の使用時間は約3～5分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。
- 化粧水やオイルなどの成分によっては本製品が変色したり塗装が剥がれる場合があります。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。
- ご使用後は必ず本製品のお手入れをしてください。(詳しくは本紙の『お手入れ方法』をご覧ください)
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元:株式会社アクセル

フリーアクセス

0120-412-917

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】
この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。
※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

- 1.火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
- 2.誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
- 3.本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
- 4.お客様による修理や改造による故障や損傷。
- 5.一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- 6.保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
- 7.ご購入日・販売店名が確認できない場合。
- 8.未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
- 9.消耗品や正常な部品の交換対応。
- 10.未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリーアクセス

0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

商 品 名	フェイシャルローラー ルフィオラ (品番:AXL-875)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。