

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## ⚠️ 必ずご確認ください

- 紫斑になりやすい方は吸引の跡がしばらく残る場合がございます。
- 本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- 口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳の周りには使用しないでください。
- ご使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。


- 肌の弱い方●紫斑になりやすい方●心臓に障害がある方または弱い方●皮膚知覚障害の方●アレルギー体質の方●病中・病後・療養中の方●貧血気味の方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●悪性腫瘍のある方●脳神経に異常がある方(てんかんなど)●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方●安静を必要とする方、四肢が不自由な方●乳幼児、子供、お年寄りなど熱さや痛みを自覚できない方●医師からマッサージを禁じられている方●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)●ケミカルピーリング、マイクロクリスタルピーリングの施術をされた方●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方●レーザー治療、美容整形等の施術をされた方●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方●ステロイド系の薬を服用している方●歯の治療中、治療直後の方●飲酒している方

## ⚠️ 使用上のご注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがなくご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。
- USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだケーブルを使用しないでください。
- 本製品を使用中または充電中に、異音・異臭や煙が発生した場合は、ただちに使用・充電を中止してください。
- 浴室などの水場や高温・多湿な場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本体を水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。
- USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- 身につけているアクセサリや貴金属類、コンタクトレンズは外してください。
- 洗顔時には使用しないでください。
- ご使用のたびに本体やアタッチメント、USBケーブルに異常がないか点検を行い、汚れやホコリなどは定期的に取り除いてください。
- 本製品を使用する前に、必ず水や化粧水などを肌につけてください。乾いた肌を使用すると皮膚を傷める原因となります。
- 肌の表面に水や化粧水がなくなった場合は、途中で補充してください。
- ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 1回の連続使用時間は約5分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を痛める原因となります。
- ご使用の際は本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。
- 肌の弱い方は、同じ箇所3回以上使用しないでください。
- 力を入れて肌にヘッドをこすりつけないでください。肌を傷める原因となります。
- ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。また、膨らんだホクロやウイルス性のイボがある部分も避けてください。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。(詳しくは「お手入れ方法」をご覧ください。)
- 本製品のアタッチメント以外は防水仕様ではありません。丸洗いはしないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。

- 接続部分を必要以上に強く引っ張るなど、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品やUSBケーブルの上に物を置かないでください。
- 内蔵電池の残量が少なく電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。
- 本製品の作動中(電源ONのとき)にアタッチメントを取り付けたり、充電を開始しないでください。
- 充電中は絶対に本製品の電源をONにしないでください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。
- 内蔵電池の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 内蔵電池は長期充電されないで性能が著しく落ちる場合がございます。  
充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。
- 本製品の充電電池は交換できません。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 小さなお子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 各部名称(セット内容)

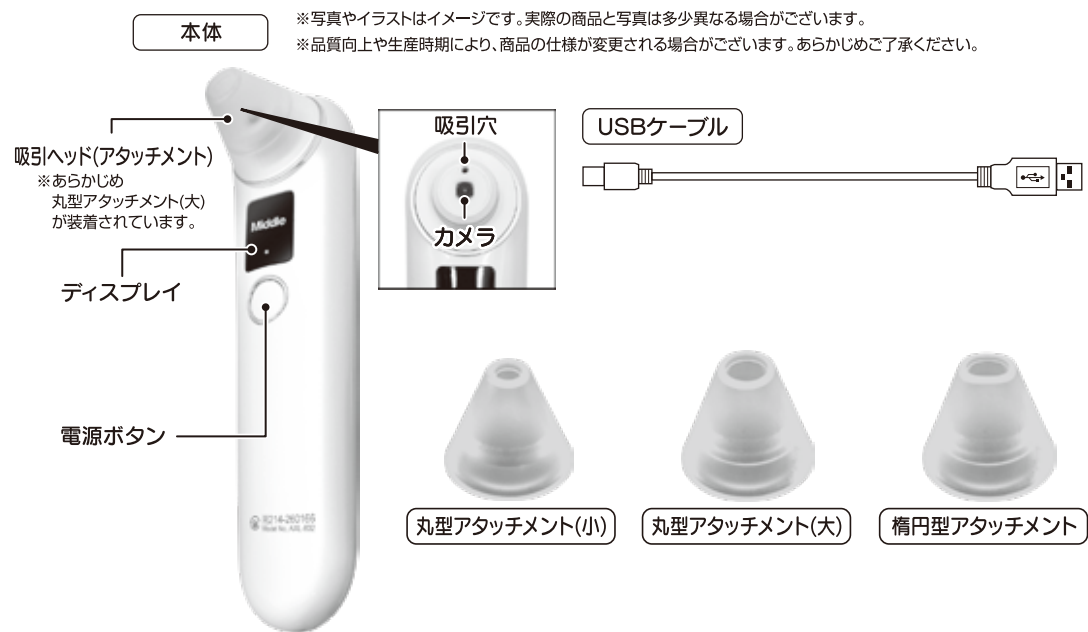

### ■ネットワーク

Wi-Fi無線規格	IEEE 802.11b/g/n
周波数	2.4GHz帯
アンテナ	内蔵型(セラミックアンテナ)
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK

### ■画像

イメージセンサー	CMOSセンサー
レンズサイズ	Φ6mm
焦点距離	13~20mm
解像度	640×480
角速度センサー	3軸ジャイロスコープ
フレームレート	最大約25fps
動画撮影時間	最長約15分

### ■その他

サイズ	約W4×D5.5×H17cm(本体)
主材質	ABS・PS・アルミニウム
電源	USB充電(5V 0.3A)
内蔵充電電池	リチウムポリマー電池(400mAh)
消費電力	1.5~2W
充電時間	約2時間
使用可能時間	約60分(Normalモード時)
使用時間	約5分(目安)
吸引力	約60kPa(Strongモード時)
動作環境	約10~45℃
対応OS	iOS 13.0以上/Android 6.0以上

※本製品は2.4GHz帯専用です。5GHz帯のSSIDには接続できません。  
※充電時間・使用可能時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。



Li-ion


●本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。使用環境及び保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることにつながります)本製品の廃棄の際には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。

## 充電方法

- ① 本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。  
充電中は本体ディスプレイの充電マークが赤色に点灯します。
- ② 充電マークが緑色に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。  
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

### 充電時間：約2時間

- ※ 充電時間はあくまで目安です。
- ※ 使用環境により異なります。
- ※ 初回の充電は上記の時間より約1～2時間長くなる場合があります。

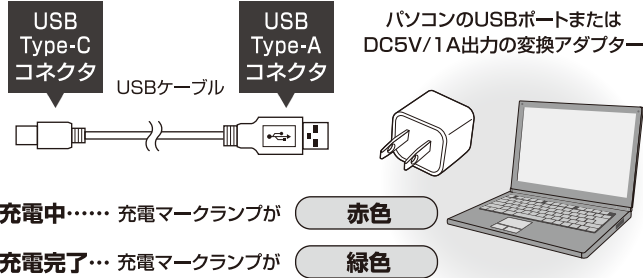

### 本体を充電中は電源をOFFにしてください。

※ 思わぬ事故の原因になりますので、充電中は電源をONにしないでください。充電後は必ずUSBケーブルを本体から取り外してください。

● 本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。● USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。● USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。● USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。● 充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。● 充電が始まらない場合は、USBケーブルを挿し直してください。● パソコンで充電をする際、パソコンが起動中に充電を開始しないでください。またごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。● 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。● 充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の内蔵電池は交換できません)

## 操作方法



### 品質改良およびアプリのアップデートについて

製品本体やアプリは、予告なく品質改良やアップデートを行う場合があります。その為、購入時期によって本紙に記載のアプリ画面や操作方法が変更されている場合があります。その場合は左のQRコードを読み取り、取扱説明書の最新情報をご覧ください。

### 設定前の注意事項

- 本製品は2.4GHz帯のWi-Fiに対応しています。
- 本製品に接続する際はWi-Fi環境下かつ、本製品の近くで設定してください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は全てのOSとの互換性を保証するものではありません。
- 本製品の操作には対応アプリを使用します。アプリサーバーのメンテナンスなどにより接続しづらいたることがあります。正常な動作ができない場合は時間を置いて再度お試しください。また、メンテナンスは予告なく行う場合があります。
- スマートフォンの通信状態が悪い場合は、アプリでの動作が正常に行われない場合があります。その場合は時間を置いてから再度お試しください。

## 本製品の接続方法

### ⚠️ スマートフォンが必要です。本製品をご使用の際はスマートフォンが別途必要となります。

#### ① アプリをインストールします。



初めて使用する場合は、QRコードをスキャンして開いたWebページよりGoogle playまたは、App Storeを選択し、表示されたアプリをインストールします。表示されない場合は各ストアから『SL Visual』を検索してください。

- ※ 警告文が表示される場合がありますが、そのままダウンロードを進めてください。
- ※ 通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。
- ※ 本製品はライセンス商品ではありません。記載されている全ての商標は各社の商標、及び登録商標です。
- ※ 【QRコード】はデンソーウェーブの登録商標です。

※ iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。



### SL Visual 対応OS:Android 6.0以上/iOS 13.0以上

- ※ アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応および回答はいたしかねます。
- ※ iOSやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。
- ※ 「SL Visual」は無料アプリです。

#### ② アプリでペアリング(機器への接続作業)をおこないます。本製品は2.4GHz帯のWi-Fiに対応しています。



※画面はiPhoneで表示されるアプリの画面です。

操作画面


- ① 本体の電源ボタンを長押しして、本体の電源をONにします。(同じ操作が続くと約15分自動で電源OFFになります。)
- ② 『SL VISUAL』のアプリを開き【未接続】をタップします。
- ③ Wi-Fiの設定画面で【SL-000000】をタップし本体とスマホを接続します。  
※000000は個体番号です。本体ごとに個体番号が振り分けられています。
- ④ 接続が完了すると操作画面に切り替わり、本体先端のカメラの画像がアプリ上で確認できるようになります。

- ※ iOSやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。
- ※ 写真への追加アクセス権を求められた場合は許可をしてください。
- ※ 接続できない場合は、下記をお試しください。
  - ・Wi-Fiをオフにし、再度オンにする
  - ・2.4GHz帯のWi-Fi環境下で行う
  - ・アプリを更新する
  - ・スマートフォンとアプリの再起動を行う。

### ③アプリの説明

※画面はiPhoneで表示されるアプリの画面です。

※iOSやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより、アプリ内の項目名や画面表示が本取扱説明書内の表記と異なる場合があります。

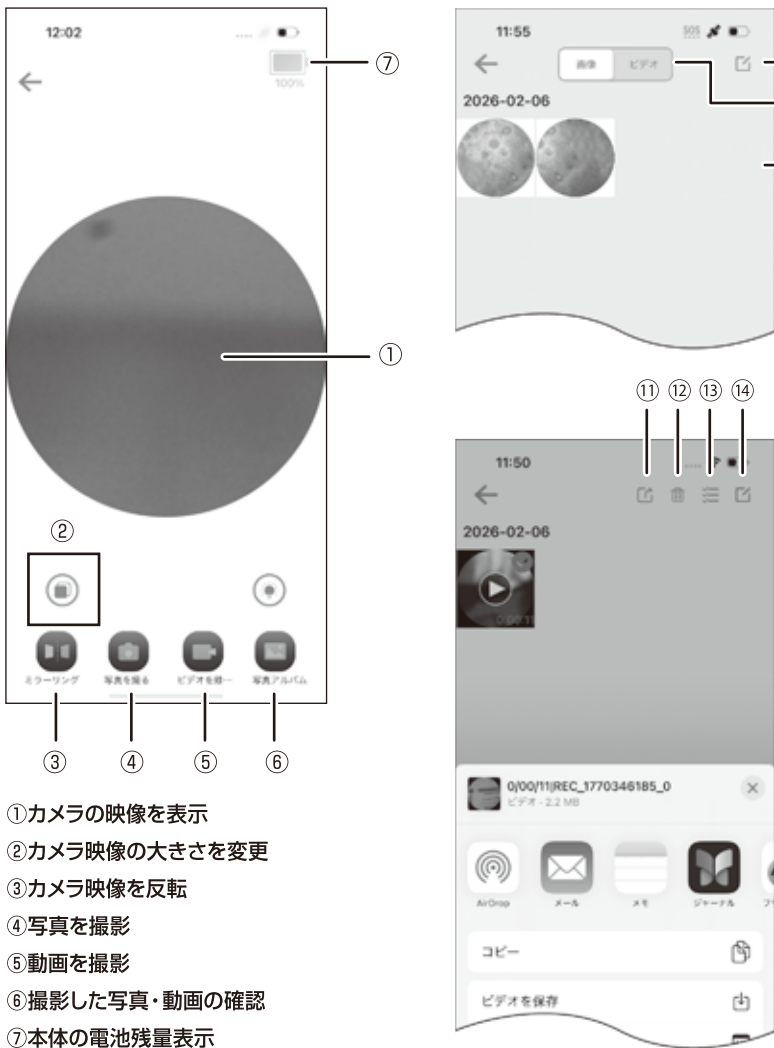

- ①カメラの映像を表示
- ②カメラ映像の大きさを変更
- ③カメラ映像を反転
- ④写真を撮影
- ⑤動画を撮影
- ⑥撮影した写真・動画の確認
- ⑦本体の電池残量表示

- ⑧メニュー・フォルダ切り替え
- ⑨写真・動画の切り替え
- ⑩撮影データ
- ⑪画像を転送など
- ⑫画像の削除
- ⑬画像を全選択
- ⑭写真・動画フォルダに戻る

※③カメラ映像を反転することで機器を動かす方向と画表示が一致します。

### 本体ご使用方法



注意

- ・本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- ・口内やのどぼとけ、眼球の近く（まぶたや目のくぼみ周辺など）、耳の周りには使用しないでください。
- ・使用中に痛みや不調を感じた時、使用後に肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。
- ・本体を水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。ショート・感電・発熱・故障の原因となります。また、浴室などの水場や高温・多湿な場所では使用しないでください。

### 本体ご使用方法



注意

- ・USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類は外してください。
- ・洗顔時には使用しないでください。
- ・本製品を使用する前に、必ず水や化粧水などを肌につけてください。乾いた肌に使用すると皮膚を傷める原因となります。
- ・肌の表面に水や化粧水がなくなった場合は、途中で補充してください。
- ・ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・ご使用の際は本製品を1箇所にとどめず、常に移動させながら使用してください。
- ・同一箇所の使用時間は2～3秒以内にしてください。
- ・肌の弱い方は、同じ箇所に3回以上使用しないでください。
- ・力を入れて肌にヘッドをこすりつけないでください。肌を傷める原因となります。
- ・髪の毛や体毛が吸い込まれないようご注意ください。
- ・ニキビなど炎症がある部分には使用しないでください。
- また、膨らんだホクロやウイルス性のイボがある部分も避けてください。

アタッチメント



### ご使用前の準備

- ①吸引ヘッドを本体にしっかり取り付けてください。
- ②洗顔を行い、肌の汚れやメイクを落としてください。吸引する部分に温かいタオルをあてるか、フェイススチーマーを使うなどして、毛穴を開いてください。



警告

- ・本製品を顔以外には使用しないでください。
- ・化粧をしている場合は、クレンジングや洗顔料で、汚れを落としてください。クレンジングや洗顔料が残ったまま、本製品を使用すると、故障の原因となります。
- ・本製品をご使用する前に必ずすべてのアタッチメントの吸引力を手の甲などで試してください。

### 本体操作方法

- ①電源ボタンを長押しし、電源をONにします。もう一度電源ボタンを押すとノーマルモードになります。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。電源ボタンを長押しすると電源OFFになります。
- ②お好みのアタッチメントを取り付け汚れを取り除きたい部分に一方へゆっくりと本製品を移動させてください。



※モードを切り替えるごとに15分で自動停止します。※使用可能時間は約40～60分です。(モードや使用環境により異なります。)

- ③初めて使用する場合や敏感肌の方は、必ずNormalモードでお試ください。  
 吸引ヘッドを肌に軽く当ててください。同じ場所に長時間当て続けしないでください。  
 額・鼻・頬など、皮膚の平らな部分の上をゆっくり滑らせるように動かしてください。
- ④吸引した部分をすいだ後、普段お使いの化粧水や乳液などで十分に保湿してください。  
 ※スクラブ入りの洗顔料や毛穴汚れや角栓を取り除く製品を使用しないでください。

**ご使用の目安** 部位やお肌によっては吸引の跡がしばらく残る場合がございます。

- 初めて使用する前に必ず目立たない場所でパッチテストを行ってください。
- 使用頻度は、週に1~2回程度を目安としてください。
- 同一箇所の使用時間は2~3秒以内、1回の使用時間は約5分です。長時間の連続使用は肌を痛める原因になります。

**正しい吸引方法**



×

吸引しながら移動する際、  
上方向に強く引っ張ると、  
お肌にダメージを与え  
赤くなる場合があります。

※肌表面



○

お肌にあて上方向に  
引っ張らないように  
お肌の表面に沿って  
ゆっくり移動してください。

※肌表面

**注意**

- 本製品を顔以外の部位に使用しないでください。
- 口内やのどぼとけ、眼球の近く(まぶたや目のくぼみ周辺など)、耳の周りには使用しないでください。

※常に肌の様子を確認しながらご使用ください。ご使用中、肌に異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。  
 ※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。

**アタッチメントの種類**



**丸型アタッチメント(小)**

使用部位: 鼻まわり、小鼻、額(ひたい)の細かい部分。  
 特長: 初めて使用する場合に、吸引口が小さく、ピンポイントで使用できます。  
 細かい部分のケアに適しています。



**丸型アタッチメント(大)×2個**

※あらかじめ本体に丸型アタッチメント(大)が装着されています。

使用部位: 頬、額(ひたい)、あご。  
 特長: 吸引口が大きいので広い範囲をなでるように使用できます。  
 顔全体を均一に使用したいときや慣れてきた方の通常使用に適しています。



**楕円型アタッチメント**

使用部位: 口元、フェイスライン  
 特長: フェイスラインに沿って使いたいときや細長い部位への使用に適しています。

**お手入れ・保管方法**

- ※ご使用のたびに必ずお手入れをしてください。化粧水や乳液、汚れなどが付着したまま保管しないでください。
- ※必ず電源スイッチがOFFになっていることをご確認ください。
- ※充電中にお手入れしないでください。
- ※お手入れ後はアタッチメントを取り付けてから保管してください。
- ※お子様の手の届かないところで保管してください。
- ※火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。

**本体**

- 乾いたやわらかい布で水分と汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は、水を含ませて固く絞った布で軽く拭き取ったあと、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

**アタッチメント**

- 流水で汚れを落とした後、十分に乾燥させてください。

**注意**

- ・本製品はアタッチメントにのみ防水加工を施しています。絶対に水をかけたり丸洗いはしないでください。
- ・漂白剤などを使用しつけ置き洗いはおやめください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤、みがき粉、研磨剤入り洗剤、たわし類(ナイロン・金属製など)、メラミンスポンジなどは使用しないでください。

**【保証書】** この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリーアクセス **0120-412-917** 【お問い合わせ】 月~金(祝日除く) 10:00~17:00

商品名	毛穴吸引器 ミエポア (品番:AXL-832)	
購入日	年	月 日
保証期間	お買い求め日より6ヶ月	
氏名		
住所	〒	
電話番号		
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)		
▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。		

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

