

X CORE LITE

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

必ずご確認ください

- 本製品は一般家庭用です。治療を目的としたものではありません。
- ご使用中に痛みや不調を感じた時、ご使用後に身体に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品が落下または強い衝撃を受けた後は、使用しないでください。内蔵充電電池が発火する恐れがあります。

※下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。

●ペースメーカーや人工心臓、心電計などの医用電子機器を使用している方(医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります)
●心臓に障害がある方または弱い方●貧血気味の方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●悪性腫瘍のある方
●脳神経に異常がある方(てんかんなど)●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害がある方●発熱(38℃以上)している方、または体に異常を感じている方●医師からマッサージを禁じられている方●皮膚アレルギーの方、過度な日焼け・炎症のある方、肌に関する施術を受けている方●湿疹、乾癬、腫瘍、傷、感染症のある方●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師に相談の上ご使用ください)●かゆみや薬疹を起こすような薬を服用されている方●代謝疾患によるニキビ、感染症、その他肌にトラブルのある方●ステロイド系の薬を服用している方●高血圧の方、紫斑になりやすい方●めまい・ふらつきなど平衡感覚に異常がある方、平衡感覚に影響が出る薬を服用している方●骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れ、痛風、などの急性(疼痛性)疾患の方●腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊椎狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科的疾患の方●背骨に異常のある方●飲酒後の方●小さなお子様や自分で操作が行えない方

※下記の部位には使用しないでください。

- 整形手術をした部位●皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位●皮膚トラブルのある部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位●腹部●胸部●頭部●首●陰部●骨折部位●背骨部位●関節部位

使用上のご注意


- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。●浴室などの水場、湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本来の用途以外には使用しないでください。●分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。●ご使用前に本製品に変形・破損がないか・アタッチメントが確実に取り付けられているかを確認してからご使用ください。異常がある場合は使用しないでください。●ご使用ごとにぐらつきなど、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。●本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。●本製品の上に物を置かないでください。●一度に振動レベルを上げないでください。加減しながら調節してください。●不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●故障の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。●同じ場所に長時間接しているとき色移りする可能性があります。●小さなお子様、乳幼児、ペットには使用しないでください。●ご使用後は必ず電源をOFFにし、本製品のお手入れをしてください。●ご使用後は毎回、水に浸した布を固くしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●電池の残量が少なくと電源ボタンを押しても動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電をしてください。●お子様の手の届かない所に保管してください。●火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

サイズ	約W11.5×D5×H13.5cm(本体)、約Φ4.5×H6.5cm(球形アタッチメント)	消費電力	25W
	約Φ3×H4.5cm(平形アタッチメント)、約W4.5×D2×H5.5cm(Y形アタッチメント)	内蔵電池	リチウムイオン電池/800mAh
	約Φ2×H5cm(円柱形アタッチメント)	充電時間	約2~3時間
主材質	ABS・シリコン・EVA	1回の使用時間	約15分 ※自動停止
電源	USB充電(DC5V/1A)	総使用可能時間	約1.5時間
電圧	7.4V	強弱レベル	6段階

※充電時間・使用時間等はあくまで目安です。使用環境により異なります。

セット内容・各部名称

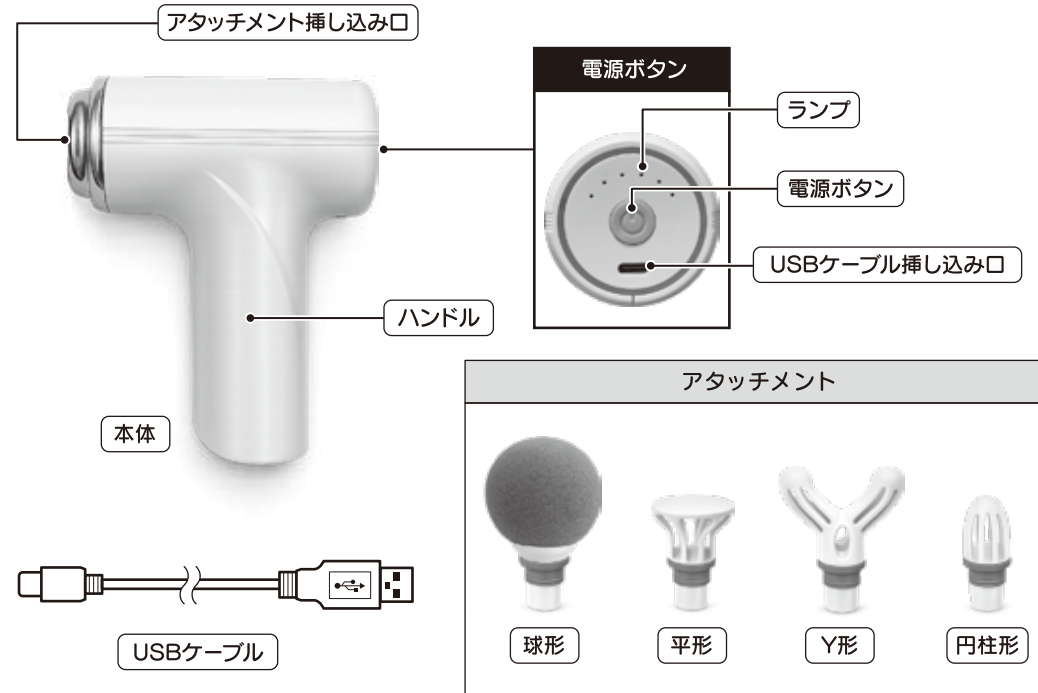

充電方法

充電時間: 約2~3時間


※使用環境により異なります。
※初回の充電は左記の時間より約1~2時間長くなる場合があります。

必ずご確認ください

本製品を充電する際は必ず、パソコンのUSBか、
本製品の規格に合った変換
アダプターをご使用ください。

DC5V/1Aの変換アダプターを
ご使用ください。

※本製品に変換アダプターは付属しておりません。別途市販のものをご用意ください。
※1Aを超えるものは使用しないでください。また1A未満のものをご使用の場合充電時間が長くなります。

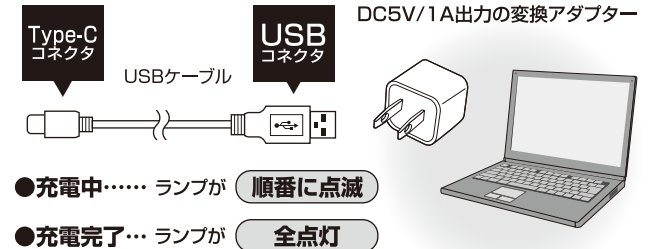

- ① 本体の電源をOFFにし、USBケーブルで本体とパソコンなどを接続し充電します。
充電中は電源ボタンのランプが順番に点滅します。

●本製品の規格以上のUSB変換ACアダプターなどを使用しないでください。発熱・発火・故障などの原因となります。●USBケーブルを抜き挿しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。●USBコネクタは、濡れた手で抜き挿ししないでください。●USBケーブル挿し込み口に、絶対に水が入らないようにしてください。故障や感電の原因となります。●充電中は絶対に本製品の電源を入れないでください。●充電が始まらない場合は、USBケーブルを押し直してください。●パソコンで充電する場合、パソコンが起動中は充電を開始しないでください。●本製品をパソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こすことがあります。その場合は充電を中止してください。

- ② すべてのランプが点灯に切り替わったら充電完了です。USBケーブルを抜いて充電を終了してください。
過充電は故障や電池の寿命を縮める原因となります。充電が完了次第、すみやかにUSBケーブルを抜いてください。

●充電時間はあくまで目安です。使用環境により異なります。●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極の活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。●充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●充電時間や使用時間が極端に変化した場合は内蔵電池の寿命です。(本製品の充電電池は交換できません。)

本製品を使用する前に必ずご確認ください

本製品は防滴・防水ではありません。

浴室などの水場、湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。感電や故障の原因になります。

●はじめは短い時間でご使用ください。刺激に慣れていない場合、けがや体調不良の原因になります。刺激の影響には個人差がある為、ご使用の際はご注意ください。●1回の使用時間は15分以内を目安にし、同一箇所への連続使用は3分以内を目安にしてください。筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、ケガをまねくことがあります。なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間を約1.5時間以内にしてください。最低30分以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。本体が熱くなり、故障の原因になります。肌の弱い方は、同じ部位に3回以上使用しないでください。●ご使用前に各アタッチメントが確実に取り付けられているか確認してください。確実に取り付けられない場合は使用しないでください。ケガや事故の原因になります。●ご使用時は全体重をかけないでください。●ご使用時は、小さなお子様やペットの近くで使用しないでください。●ご使用時は必要以上に強く押し当てたり、早く動かしたりしないでください。皮膚や筋肉を傷める原因になります。また肌の弱い方は使用しないでください。●充電ケーブルを本体に挿したまま使用しないでください。●腹部や胸部、頭部、首、陰部、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には絶対に使用しないでください。●本製品は振動します。落とさないようにしっかりと握ってください。●アクセサリーやマフラーなどの巻き込みの原因になるものは外してください。髪の毛が長い方は束ねてからご使用ください。●次のようなときは使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。1.疲労が激しい時 2.飲酒前、飲酒後 3.食前、食後の1時間 4.睡眠中5.皮膚に異常のある時●ご使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。●子供やペットに本製品で遊ばせたり、使用させないでください。事故やけが、体調不良の原因になります。●ご使用時に異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。●本製品を共用で使用する場合はご使用のたびに必ずお手入れをおこなってください。

ご使用方法

1 アタッチメントを取り付ける(準備)

本体のアタッチメント挿し込み口にお好みのアタッチメントを取り付けます。確実に奥まで挿し込んでください。

2 電源をON(使用開始)

電源ボタンを長押しすると、ランプが点灯し、振動レベル1から開始します。

※電源ボタンはしっかりと押ししてください。押す力加減によっては反応しない場合があります。

3 ハンドルをしっかりと手で持ち お好みの部位に軽く当ててください。

※初めて使用する際は、レベル1から使用してください。

慣れてきたら、レベルを上げてご使用ください。

※1回の使用時間は15分以内を目安としてください。また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安としてください。

4 強弱レベル調節(レベル1~6段階)

レベルは、6段階(レベル1~6)から選べます。電源ON時はレベル1になっています。

レベルを上げる場合は、電源ボタンを押ししてください。電源ボタンを押すごとに、レベルが1ずつ上がります。

レベル6の状態電源ボタンを押すとレベル1に戻ります。

5 電源をOFF(使用停止) 約15分で自動停止します。

電源ボタンを長押しすると、停止します。※電源ボタンはしっかりと押ししてください。

押す力加減によっては反応しない場合があります。※電源ボタンを押さない場合は自動で15分後に停止します。

圧力・セーフティセンサー搭載

圧力センサー

本製品を動作中、使用部位に強く押し付けると、センサーが反応し、さらに強く動作します。

セーフティセンサー

本製品を動作中、使用部位に非常に強い力で押し付けると、センサーが反応し、一時停止します。押す力を緩めると、再び動きます。

ご使用方法



広範囲を効率よく刺激



カーブに合わせて刺激



平らな面で均一に刺激



ピンポイントで刺激

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及びご購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル

〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～17:00

商品名	ボディケアガン X コア ライト (品番:AXL-905)
購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より6ヶ月
氏名	
住所	〒
電話番号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。



●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。使用環境及び保管環境により劣化の度合いが変わります。また、劣化の度合いにより充電時間及び連続使用時間が異なります。●使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。(リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ることに繋がります)本製品の廃棄の際には、各地域の自治体の指示に従い廃棄してください。